




1

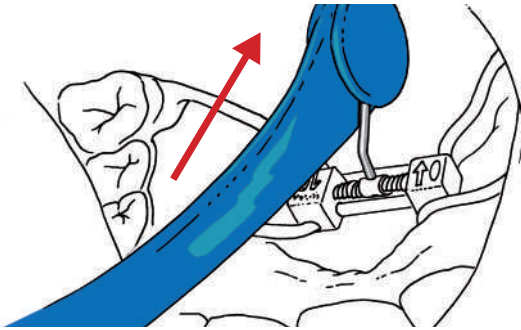

2

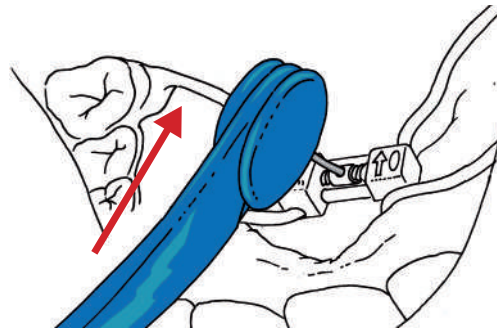

3

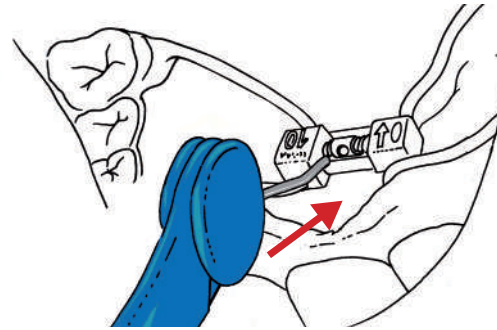

4

## Procedimiento de activación en el hogar

Abra bien la boca e introduzca la llave con mango en el agujero anterior visible del tornillo.  
(Figura 1-2)

Empuje la llave progresivamente hacia la parte posterior de la boca del niño hasta que el movimiento de rotación se detenga. A continuación, retire la llave, teniendo cuidado de evitar la desactivación.  
(Figura 3-4)

Si el médico lo prescribe, repita el procedimiento indicado para lograr una mayor expansión.

Marque el número de activaciones en la tarjeta

1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

Nombre \_\_\_\_\_

Apellido \_\_\_\_\_

Edad \_\_\_\_\_ Sexo M  F

Fecha de colocación del expansor \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Máximo de activaciones permitidas \_\_\_\_\_

Prescripción



# Instrucciones

Para activar el expansor rápido del paladar



ISTR.78/12-16 December 1, 2016