




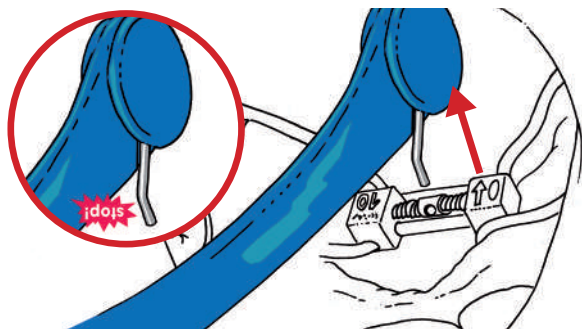


1

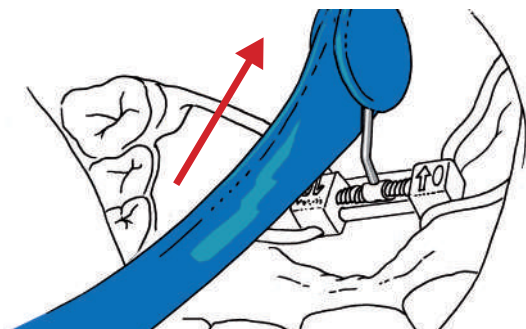

2

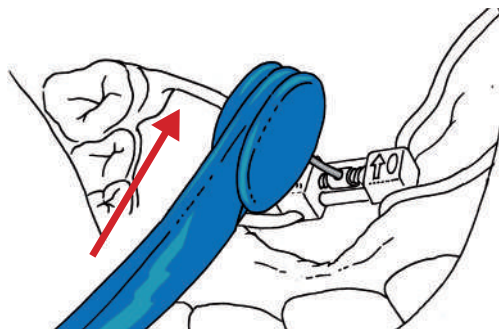

3

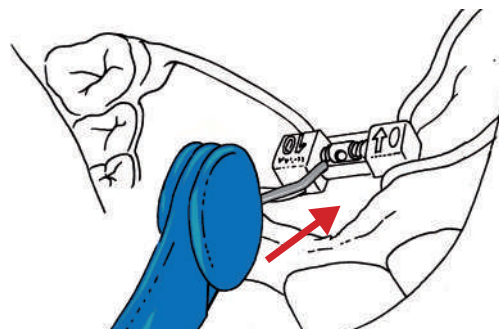

4

家用激活操作步骤

张开嘴，小心地将旋转激活钥匙插入扩张器中央的小孔（如图：1-2）

平稳的将钥匙向口腔后方推动直到旋转停止。旋转停止后小心地将钥匙移出。（如图：3-4）

按照医生建议重复以上步骤

在数字后记录你的激活进度

DAY	SUN	MOON	DAY	SUN	MOON
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

名字 _____

姓氏 _____

年龄 _____ 性别 男 ☐ 女 ☐

扩弓器佩戴日期做 _____ / /

允许最大激活范围 _____

医生建议

DAY	SUN	MOON

使用说明书 高效扩弓器激活敌

