




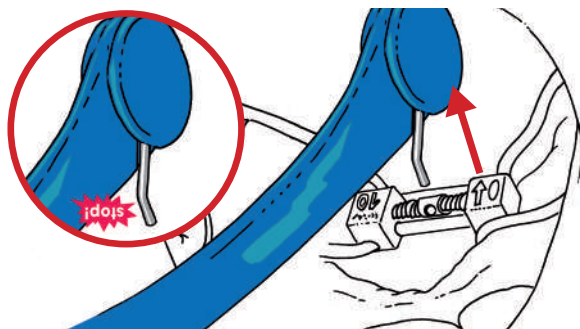


1

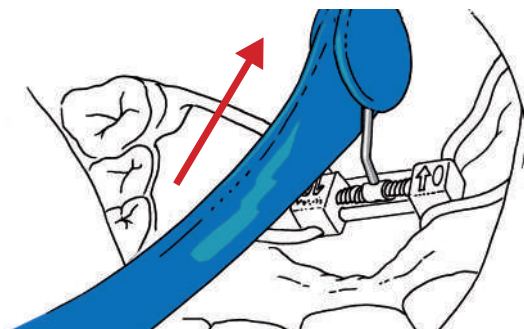

2

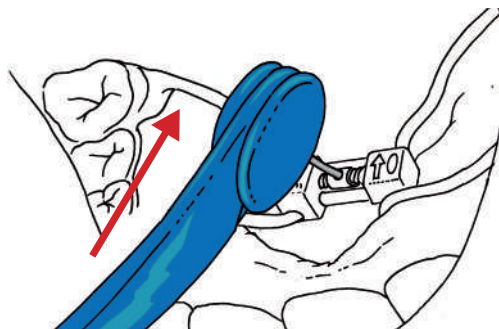

3

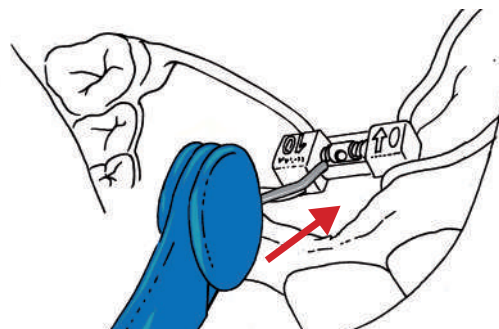

4

Procédure d'activation à domicile

Ouvrir grand la bouche et insérez la clé pivotante dans le trou au milieu de l'appareil (Fig. 1-2)

Pousser la clé progressivement vers le fond de la bouche de l'enfant jusqu'à sentir l'arrêt du mouvement de rotation. Retirez ensuite la clé en prenant soin d'éviter la désactivation. (Fig. 3-4)

Suivant la prescription du clinicien, répétez la procédure pour obtenir une expansion supplémentaire.

Marquez le nombre d'activations effectuées sur ce tableau

DAY	SUN	MOON	DAY	SUN	MOON
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

Prénom _____

Nom _____

Age _____ Genre M ☐ F ☐

Date de début de l'extension _____ / _____ / _____

Nombre maximal d'activations autorisées _____

Prescription

DAY	SUN	MOON

ISTR.78/12-16 December 1, 2016

Instruction

pour activer le disjoncteur rapide palatin

