

BRACKETS C.D. GHIACCIO
sistema MBT*

		torque	ang.	.022" x .030"	
		3.2	+17°	+4°	<u>1</u> F5521-02 <u>1</u> F5521-03
		2.8	+10°	+8°	<u>2</u> F5522-02 <u>2</u> F5522-03
		3.4	-7°	+8°	<u>3</u> F5513-02 <u>3</u> F5513-03
		3.2	-7°	0°	<u>4</u> F5619-02 <u>4</u> F5619-03
		3.2	-7°	0°	<u>5</u> F5619-02 <u>5</u> F5619-03
		2.8	-6°	0°	<u>1</u> F5520-06 <u>1</u> F5520-07
		2.8	-6°	0°	<u>2</u> F5520-06 <u>2</u> F5520-07
		3.4	-6°	+3°	<u>3</u> F5513-06 <u>3</u> F5513-07
		3.2	-12°	+2°	<u>4</u> F5514-06 <u>4</u> F5514-07
		3.2	-17°	+2°	<u>5</u> F5515-06 <u>5</u> F5515-07

Confecciones de 1 pieza

BRACKETS C.D. GHIACCIO
sistema MBT*

		6 brackets	10 brackets
		<u>3 2 1 1 2 3</u>	<u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u>
.022"	F5506-21	F5510-21	
		12 brackets	20 brackets
		<u>3 2 1 1 2 3</u> <u>3 2 1 1 2 3</u>	<u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u> <u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u>
.022"	F5512-21	F5520-20	

BRACKETS C.D. GHIACCIO
sistema Roth

		torque	ang.	.018" x .030"	.022" x .030"
		3.2	+12°	+5°	<u>1</u> F5681-12 <u>1</u> F5681-13
		2.8	+8°	+9°	<u>2</u> F5682-12 <u>2</u> F5682-13
		3.4	-2°	+13°	<u>3</u> F5673-12 <u>3</u> F5673-13
		3.2	-7°	0°	<u>4</u> F5679-02 <u>4</u> F5679-03
		3.2	-7°	0°	<u>5</u> F5679-02 <u>5</u> F5679-03
		2.8	0°	0°	<u>1</u> F5680-06 <u>1</u> F5680-07
		2.8	0°	0°	<u>2</u> F5680-06 <u>2</u> F5680-07
		3.4	-11°	+7°	<u>3</u> F5673-16 <u>3</u> F5673-17
		3.2	-17°	0°	<u>4</u> F5674-06 <u>4</u> F5674-07
		3.2	-22°	0°	<u>5</u> F5675-06 <u>5</u> F5675-07

Confecciones de 1 pieza

BRACKETS C.D. GHIACCIO
sistema Roth

		6 brackets	10 brackets	12 brackets	20 brackets
		<u>3 2 1 1 2 3</u>	<u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u>	<u>3 2 1 1 2 3</u> <u>3 2 1 1 2 3</u>	<u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u> <u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u>
.018"	F5606-81	F5610-81	F5612-81	F5620-82	
.022"	F5606-21	F5610-21	F5612-21	F5620-22	

*MBT es una marca registrada 3M Unitek

Los brackets presentados en este folleto no son copias de ningún otro bracket, ni Leone S.p.A. sostiene que estos sean aprobados en algún modo por los Médicos o las Escuelas mencionados.



transparente
y CRISTALINO

GHIACCIO

el bracket ortodóntico estético



ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

LEONE S.p.a Via P. a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino FIRENZE (Italia) info@leone.it www.leone.it

Departamento de Exportación:
tel +39.055.3044620 fax +39.055.304405 export@leone.it



ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA


SP-01-17

transparente y CRISTALINO

Los brackets **GHIACCIO** fabricados en zafiro **TRANSPARENCIA** y dureza; sofisticadas características modernas **EXIGENCIAS BIOMECÁNICAS**,

MONOCRISTALINO biomédical reúnen excepcional de los brackets estéticos ideales para satisfacer las cosméticas y de **CONFORT**

● El diseño

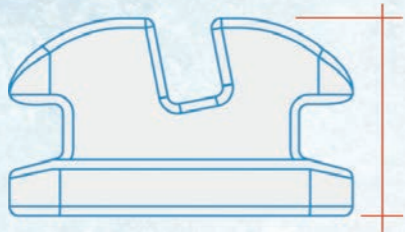

El **perfil particularmente reducido** en altura y el biselado de los bordes de los brackets aumentan la comodidad y la satisfacción del paciente.

● El posicionamiento



La conformación **diagonal** facilita el correcto posicionamiento gracias a la intuitiva alineación sobre el eje de la pieza. La presencia de un "escalón" a los lados de la base favorece una **segura sujeción de las pinzas** sobre la superficie mesio/distal, evitando así interferencias de las mismas durante el posicionamiento; **favorece la localización y la eliminación del composite excedente** en las fases de cementado directo.

● La capacidad retentiva y la fácil remoción

La base dispone de una retención mecánica debido a la presencia de **microperlas de Circonio** en los 2/3 de la superficie para asegurar la retención necesaria a lo largo de la terapia; además permite una **fácil remoción** una vez finalizado el tratamiento.



● La biomecánica



El innovador tratamiento superficial al Plasma **disminuye la fricción** slot/arco y aumenta la solidez estructural del bracket.



ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA