


INSTRUMENTAL PARA CLÍNICA Y LABORATORIO



T

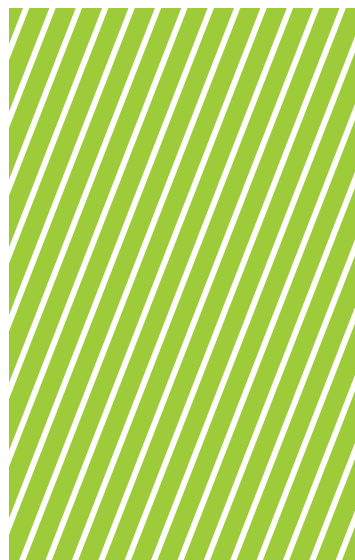


MODELOS DE DEMOSTRACIÓN ORTODONCIA FIJA

Modelos de demostración en normoclusión de resina bicolor, son útiles para visualizar las características de los brackets, tanto para los pacientes como para los potenciales clientes. Disponibles con brackets de varias tipologías, en acero, cerámica y también autoligables; sobre los molares están presentes, en todos los modelos de demostración, los tubos simples Low Profile.

Envase: 1 pieza



T3472-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN MINI DIAGONALI®

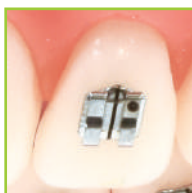

T3442-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN MIDI DIAGONALI



T3461-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN STEP SYSTEM 2.0





T3457-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN AQUA SL




T3411-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN INTERACTIVE SL



T3456-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN GHIACCIO



T3458-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN AQUA

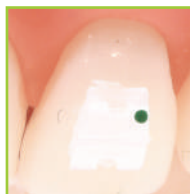

T3061-00
ZOCALADORES
DE PLÁSTICO

Zocaladores de plástico blanco irrompible, dotados de charnelas posteriores para mantenerlos en oclusión. Tallados según el estándar internacional, presentan una altura constante, que permite obtener modelos confrontables a lo largo del tiempo, y comparables en todas las visiones, para un correcto diagnóstico y control de la terapia. Se utilizan con el práctico plano de posición T3062-02 suministrado en el envase; para una elaboración sencilla, precisa y limpia, que podrá ser efectuada también en clínica.

Envase:

- 100 piezas para superior
- 100 piezas para inferior
- 2 planos de posición con guías correspondientes y etiquetas de identificación del paciente



T3062-00
CHARNELAS DE RECAMBIO
PARA ZOCALADORES

Envase: 10 piezas

T3062-01
ETIQUETAS DE RECAMBIO
PARA ZOCALADORES

Envase: 100 piezas

T3062-02
PLANOS DE POSICIÓN
PARA ZOCALADORES

Envase: 10 piezas con 20 guías

T1121-00
OCLUSOR VERTICAL
DE DOBLE EJE

Construido íntegramente en acero inoxidable con altísima precisión. Gracias al movimiento sobre un doble eje, elimina cualquier desplazamiento lateral indeseado. Posibilidad de desmontar los modelos mediante el tornillo de bloqueo.

Tornillo de bloqueo T1122-00.





**FORMAS DE GOMA
PARA BASES
DE MODELOS**

T3320-00 Forma grande

Envase: 2 piezas,
superior e inferior

T3321-00 Forma pequeña

Envase: 2 piezas,
superior e inferior



**T3355-00
MODELBOX**

Contenedores de PVC transparente,
dotados de esponja perfilada para una
total y perfecta protección del modelo
durante el transporte.

Envase: 100 piezas



**T3529-00
DIENTES DE RESINA
PARA TIPODONTO T3330-00**

Expresamente estudiados para el tipodonto T3330-00, son indispensables si se quieren hacer prácticas con los brackets de cementado directo.

Envase: 28 dientes



CERAS PARA TIPODONTO

- T3332-00** Clase I
- T3336-00** Normoclusión
- T3337-00** Clase II, I div.
- T3338-00** Clase II, II div.
- T3339-00** Clase III

Envase: 2 piezas,
superior e inferior



**T1315-00
HIDROMUFLA LEONE**

Las resinas ortodónticas autopolimerizables, requieren una polimerización a presión. Este tipo de polimerización favorece la evaporación del monómero y condensa el acrílico, que se adaptará perfectamente al modelo de yeso. Las superficies de las placas resultarán bien acabadas, y podrán ser rápidamente brillantadas con poco pulido. La hidromufla Leone permite emplear la técnica de polimerización a presión con sencillez y economía.

Características técnicas:

- Dimensiones internas: 100 x 115 mm
- Dimensiones externas: 111 x 130 mm
- Manómetro
- Válvula de descarga
- Construida en duraluminio
- Termómetro incorporado



**T1310-00
HIDROMUFLA LEONE**

Similar a la T1315-00, pero sin termómetro y ligeramente más baja.

Características técnicas:

- Dimensiones internas 100 x 88 mm
- Dimensiones externas 111 x 105 mm
- Manómetro
- Válvula de descarga
- Construida en duraluminio

**RECAMBIOS
PARA HIDROMUFLAS**

- T2300-00** Tapadera
- T2301-00** Goma tapadera
- T2302-00** Válvula de aire
- T2303-00** Termómetro para T1315-00
- T2304-00** Manómetro



**T1311-00
BRIDA PARA HIDROMUFLA**

Cómoda brida de aluminio fundido a presión, para las hidromuflas Leone T1310-00 y T1315-00. Muy manejable.

**CONTENEDORES
PARA ZOCALADORES**

- T3360-00** Azul
- T3361-00** Rojo

Dos cajones que contienen seis modelos en forma de zócalo cada uno.
Dimensiones externas:
250 x 200 x 80 mm.
Envase: 16 cajas

**CONTENEDORES
PARA MODELOS DE MUSEO**

- T3350-00** Azul
- T3351-00** Rojo

Dos cajones que contienen ocho modelos cada uno.
Dimensiones externas:
285 x 190 x 55 mm.
Envase: 24 cajas





T3603-00
HOJAS DE ACETATO
PARA TRAZAR

Formato 203 x 254 mm, con una superficie opaca y una brillante.

Envase: 100 hojas



T3608-00
LÁPIZ
BLANCO

Para marcar arcos, bite, etc.

Envase: 1 pieza



T3612-01
GONIÓMETRO-
CEFALÓMETRO

La medición angular está simplificada por la regla. Las ságomas de los incisivos, de los molares y los agujeros circulares de diferentes dimensiones favorecen la evidenciación anatómica en el trazado.

Envase: 1 pieza



T1565-00
SIERRA



HOJAS PARA SIERRA
T1565-00

T1566-00 12 hojas para yeso

T1567-00 12 hojas para metal



SIERRA
PARA SET-UP

T1561-00 Sierra con 1 hoja

T1563-00 12 hojas dientes anchos

Fácil substitución de las hojas.
Perfectamente manejable.

PLANCHAS DE COPOLIMERO LEONE

Formato 130 x 140 mm, en espesor de 2 o 3 mm a demanda. Están producidas con un material que tiene la característica de volverse blando gelatinoso a 90° C. Una vez inmersas en el agua hirviendo, se pueden apoyar y estampar directamente sobre el modelo mediante la prensa; se obtiene así una impresión perfecta del modelo que se quiere duplicar.

T0900-02 Envase: 50 planchas de 2 mm

T0900-03 Envase: 50 planchas de 3 mm



T0900-92 Envase: 500 planchas de 2 mm

T0900-93 Envase: 500 planchas de 3 mm



T1200-00
PORTA-ALICATES



T1203-00
PORTA-ALICATES



T1212-00
PORTA-ARCOS ESTÁNDAR