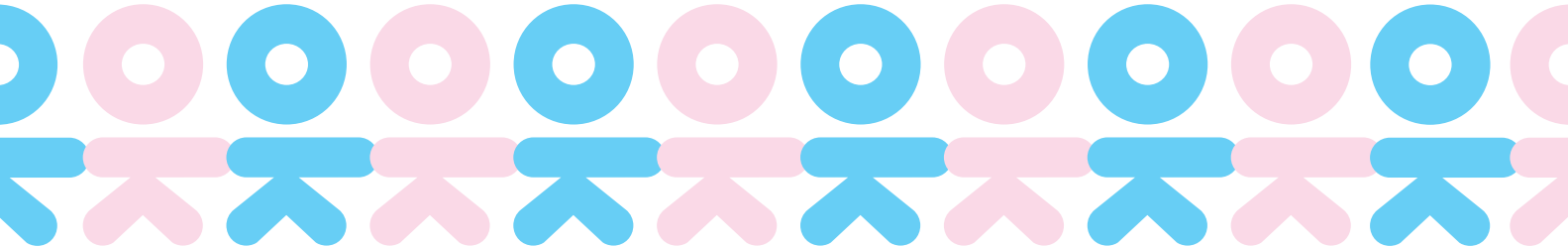


# ORTHODONTICS FOR KIDS



Ortodonzia e Implantologia

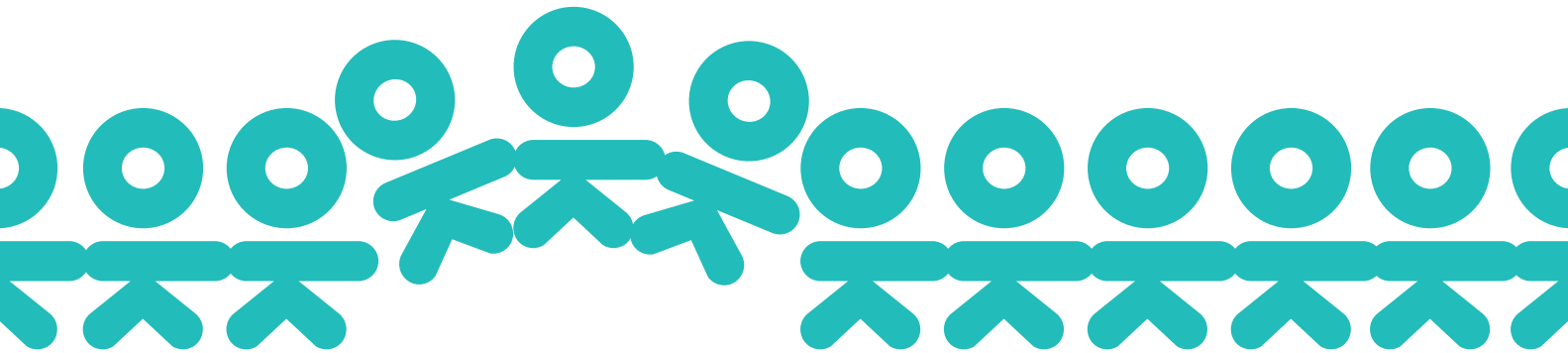
## **“UN BIMBO SENZA SORRISO È COME UN GIARDINO SENZA FIORI”**

CON QUESTA FRASE, NEGLI ANNI '70, ALESSANDRO POZZI PUBBLICIZZAVA L'ORTODONZIA PEDIATRICA DELINEANDO ANCHE LA MISSION DELLA LEONE E DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE: “DARE AI BIMBI IL DONO MERAVIGLIOSO DEL SORRISO È COMPITO DELLA NATURA, MA CONSERVARE QUESTO DONO È ANCHE IL NOSTRO DOVERE.”


NEGLI ULTIMI 40 ANNI L'ORTODONZIA HA FATTO ENORMI PROGRESSI IN QUESTO SENSO, GRAZIE ALLA MESSA A PUNTO DI NUOVE TECNICHE, ALLE CAPACITÀ DI OTTIMI PROFESSIONISTI E A NUOVI DISPOSITIVI DISPONIBILI OGGI SUL MERCATO. DA PARTE SUA LA LEONE PROGETTA E PRODUCE PRODOTTI PER ORTODONZIA DI ALTA QUALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI APPARECCHI SEMPRE PIÙ CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI PROFESSIONISTI.

I TRATTAMENTI ORTODONTICI NEI BAMBINI SONO IN COSTANTE AUMENTO PERCHÉ OGGI, PIÙ CHE IN PASSATO, LE FAMIGLIE SONO MOLTO PIÙ ATTENTE ALLA SALUTE ORALE DEI PROPRI FIGLI. PROPRIO PER QUESTO, LA LEONE, PER AGEVOLARE IL PROFESSIONISTA NELLA SCELTA DELLA TERAPIA, HA SELEZIONATO E RAGGRUPPATO UNA SERIE DI PRODOTTI DEDICATI AI PICCOLI PAZIENTI; INOLTRE QUELL'IDEA E QUELLA FILOSOFIA DELINEATA A SUO TEMPO DA ALESSANDRO POZZI, È EVIDENZIATA ED ATTUALIZZATA NEL PITTOGRAMMA DEL LOGO **OK – ORTHONDONTICS** FOR **KIDS** DOVE SI TROVA LA STESSA SILHOUETTE DEL BAMBINO GIÀ PRESENTE NELLA COPERTINA DEL PRIMO CATALOGO ORTODONZIA DATATO 1973.





# VITI ORTODONTICHE PER APPARECCHI FISSI

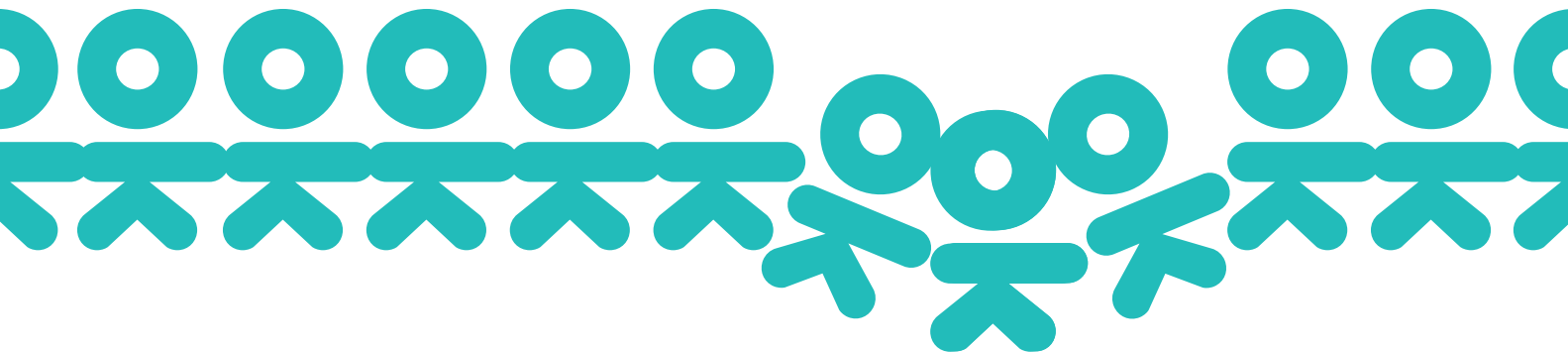

## MICRO ESPANSORE PER DISGIUNZIONE PALATALE EASY ACCESS

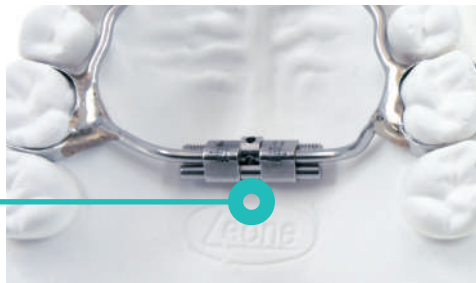
L'ESPANSORE A1621 "EASY ACCESS" SI DIFFERENZIA DAL MODELLO A0621 IN QUANTO, UNA VOLTA POSIZIONATO NELL'APPARECCHIO, IL CORPO DELLA VITE SARÀ PIÙ VICINO AL PALATO PER UN MINOR INGOMBRO E LA TESTA DELLA VITE CON I FORI DI ATTIVAZIONE RISULTERÀ IN POSIZIONE ANTERIORE RISPETTO ALLA GUIDA, QUINDI, DI FACILE ACCESSO PER L'ATTIVAZIONE CON LA CHIAVETTA.

FORNITO CON CHIAVETTA SNODATA CON MANICO E ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE PER FACILITARE L'ATTIVAZIONE ENDORALE DOMICILIARE.

CONFEZIONI DA 1 PEZZO






CHIAVETTA  
SNODATA INCLUSA  
NELLA CONFEZIONE



**POSIZIONE ANTERIORE**  
DEI FORI DI ATTIVAZIONE

**3 CAPACITÀ ESPANSIVE**  
PER OGNI NECESSITÀ  
TERAPEUTICA

**FACILE ACCESSO**  
PER L'ATTIVAZIONE  
CON LA CHIAVETTA

 4,95 mm	 4,05 mm	 bracci 1,5 mm	 0,8 mm	<b>CODICE</b>			fori da attivare
					carpo mm	mm	per la max espansione consentita
				<b>A1621-08</b>	12	8	35
				<b>A1621-11</b>	16	11	50
				<b>A1621-13</b>	18	13	60


# VITE RAGNO DISGIUNTORE E MINI DISGIUNTORE RAPIDO A VENTAGLIO <sup>(BREVETTATO)</sup>

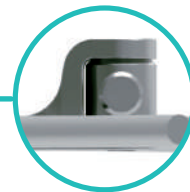DA UN'IDEA DELLA DR.SSA ELEONORA SCHELLINO  
E DEL PROF. REMO MODICA




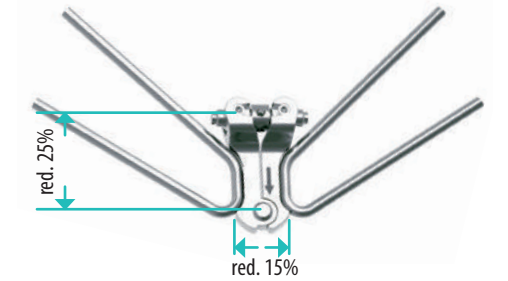
INTERAMENTE COSTRUITO IN ACCIAIO INOSSIDABILE BIOMEDICALE. I BRACCI SONO SALDATI LASER SUL CORPO. FRECCHE INDICANTI LA DIREZIONE D'APERTURA INTEGRALI NEL CORPO **MIM**®. È UN DISPOSITIVO PER L'ESPANSIONE RAPIDA DEL PALATO CHE PERMETTE DI OTTENERE UN ALLARGAMENTO DEL SOLO SETTORE ANTERIORE DEL MASCELLARE, MANTENENDO MINIMA O NULLA L'ESPANSIONE A LIVELLO MOLARE. AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA CAPACITÀ ESPANSIVA SI AUTODISATTIVA ANNULLANDO LA POSSIBILITÀ DI OVERTREATMENT. LA CARATTERISTICA GEOMETRICA CHE MAGGIORMENTE DIFFERENZIA I DUE MODELLI È LA CONFORMAZIONE DELLA PARTE ANTERIORE, CHE NEL CASO DELLA MINI A0625-07 È STATA PROGETTATA PER POTER COLLOCARE LA VITE IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE NEL PALATO PER AVERE IL MINIMO INGOMBRO. L'INGOMBRO COMPLESSIVO È DI CIRCA IL 20-25% MM IN MENO RISPETTO ALLA VERSIONE 9 MM. FORNITI CON CHIAVETTA SNODATA E ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE PER FACILITARE L'ATTIVAZIONE ENDORALE DOMICILIARE.

CONFEZIONI DA 1 PEZZO

[WWW.LEONE.IT/OK](http://WWW.LEONE.IT/OK)





	CODICE			fori da attivare
		mm	mm	per la max espansione consentita
	<b>A0625-09</b>	9	0,9	40
 <p data-bbox="287 974 542 1002"><b>DIMENSIONI RIDOTTE</b></p>	<b>A0625-07</b>	7	0,9	31

# LEAF EXPANDER®

## ESPANSORE RIATTIVABILE CON MOLLE A BALESTRA MEMORIA®

QUESTO DISPOSITIVO, EVOLUZIONE DEL PRECEDENTE ESPANSORE ATTIVABILE A MOLLA PROGETTATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEL DR. CLAUDIO LANTERI E DEL SIG. FILIPPO FRANCOLINI, HA IL CORPO DI DIMENSIONI RIDOTTE E, GRAZIE ALLE DUE MOLLE A BALESTRA DI NICHEL TITANIO MEMORIA®, RILASCIAMOLLE FORZE CALIBRATE E COSTANTI AL FINE DI OTTENERE L'ESPANSIONE DEL MASCELLARE. LA NECESSITÀ DI RIATTIVAZIONE È EVIDENTE QUANDO LE DUE BALESTRE CONTRAPPOSTE RISULTANO VISIBILMENTE DISCOSTE: L'ATTIVAZIONE ENDORALE, DA EFFETTUARSI IN STUDIO, RIPORTERÀ A CONTATTO LE MOLLE CONSENTENDO IL RILASCIO DELLA FORZA PRESELTA. L'ESPANSORE È DISPONIBILE IN DUE MODELLI CHE GENERANO RISPETTIVAMENTE 450 GR E 900 GR. FORNITO CON CHIAVETTA SNODATA CON MANICO PER FACILITARE L'ATTIVAZIONE ENDORALE PROFESSIONALE.

LA CONFEZIONE INCLUDE ANCHE UN'APPOSITA CLIP PER MANTENERE COMPRESSE LE BALESTRE, FACILITANDO IL TECNICO ED IL CLINICO IN SPECIFICHE FASI DELLA REALIZZAZIONE E DEL TRATTAMENTO. DISPONIBILE L'APPOSITO STRUMENTO AUTOBLOCCANTE PER LA MODELLAZIONE DEI BRACCI CAT. P0620-00.

CONFEZIONI DA 1 PEZZO

WWW.LEONE.IT/OK

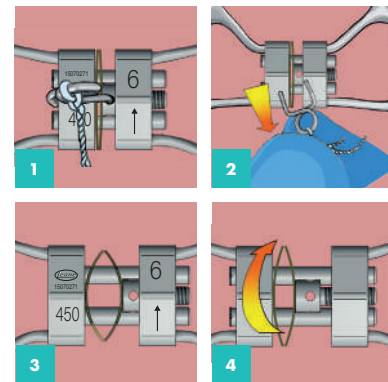












LEAF EXPANDER®



CHIAVETTA  
SNODATA E CLIP  
INCLUDE NELLA  
CONFEZIONE

### SCHEMA UTILIZZO ENDORALE



 11 mm	 4 mm	<b>CODICE</b>	 bracci mm	 corpo mm	 mm	 mm	fori da attivare  <i>per la max espansione consentita</i>
	<b>A2703-06</b> 2 molle 450 gr ca.	1,5	12	6	0,4	30	
	<b>A2704-06</b> 2 molle 900 gr ca.	1,5	12	6	0,4	30	
	<b>A2703-09</b> 3 molle 450 gr ca.	1,5	12	9	0,4	45	
	<b>A2704-09</b> 3 molle 900 gr ca.	1,5	12	9	0,4	45	

<b>PROTOCOLLO DI ATTIVAZIONE</b>	cementazione espansore Leaf		PRIMA seduta		SECONDA seduta		TERZA seduta
<b>6 mm</b> <b>A2703-06 - A2704-06</b>	sblocco molle 0 attivazioni	dopo <b>6 settimane</b>	10 attivazioni	dopo <b>4 settimane</b>	10 attivazioni	dopo <b>4 settimane</b>	10 attivazioni
<b>9 mm</b> <b>A2703-09 - A2704-09</b>	sblocco molle 0 attivazioni	dopo <b>8 settimane</b>	15 attivazioni	dopo <b>6 settimane</b>	15 attivazioni	dopo <b>6 settimane</b>	15 attivazioni

# LEAF SELF EXPANDER®

## ESPANSORE AUTO ATTIVABILE\* CON MOLLE A BALESTRA MEMORIA®

(BREVETTATO)

PRESENTA TUTTI I VANTAGGI DEL LEAF SENZA LA NECESSITÀ DELLA RIATTIVAZIONE PERIODICA. IL LAVORO DI QUESTO ESPANSORE È AFFIDATO TOTALMENTE ALLA CAPACITÀ ELASTICA DELLE BALESTRE REALIZZATE IN NICHEL TITANIO CHE RILASCIANO FORZE CONTROLLATE E CONTINUE.

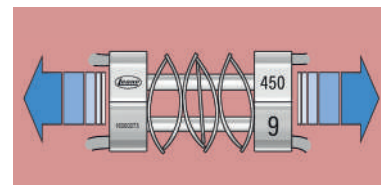
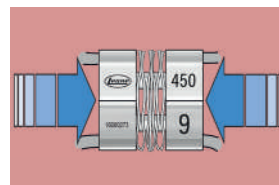
LA SCELTA DELL'ESPANSORE VIENE DECISA SULLA BASE DELLA DISCREPANZA TRASVERSALE DEL PAZIENTE: LA TERAPIA, QUINDI, RISULTA PREDETERMINATA E NON NECESSITA DI NESSUNA ULTERIORE AZIONE NÉ DA PARTE DEL CLINICO NÉ TANTOMENO DA PARTE DEL PAZIENTE. DISPONIBILE IN DUE LIVELLI DI FORZA E DUE CAPACITÀ ESPANSIVE PER SODDISFARE LA QUASI TOTALITÀ DELLE SITUAZIONI DI DEFICIT MASCELLARE.






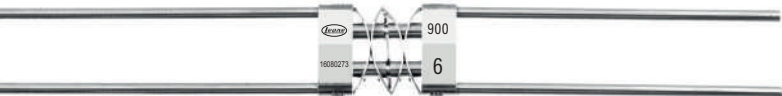

DISPONIBILE L'APPOSITO STRUMENTO AUTOBLOCCANTE PER LA MODELLAZIONE DEI BRACCI CAT. P0620-00.


CONFEZIONI DA 1 PEZZO




[WWW.LEONE.IT/OK](http://WWW.LEONE.IT/OK)



 11 mm	 4 mm	<b>CODICE</b>	 bracci	 corpo	 mm
	<b>A2705-06</b> 4 molle 450 gr ca.	1,5	12	6	
	<b>A2706-06</b> 4 molle 900 gr ca	1,5	12	6	
	<b>A2705-09</b> 6 molle 450 gr ca.	1,5	12	9	
	<b>A2706-09</b> 6 molle 900 gr ca	1,5	12	9	

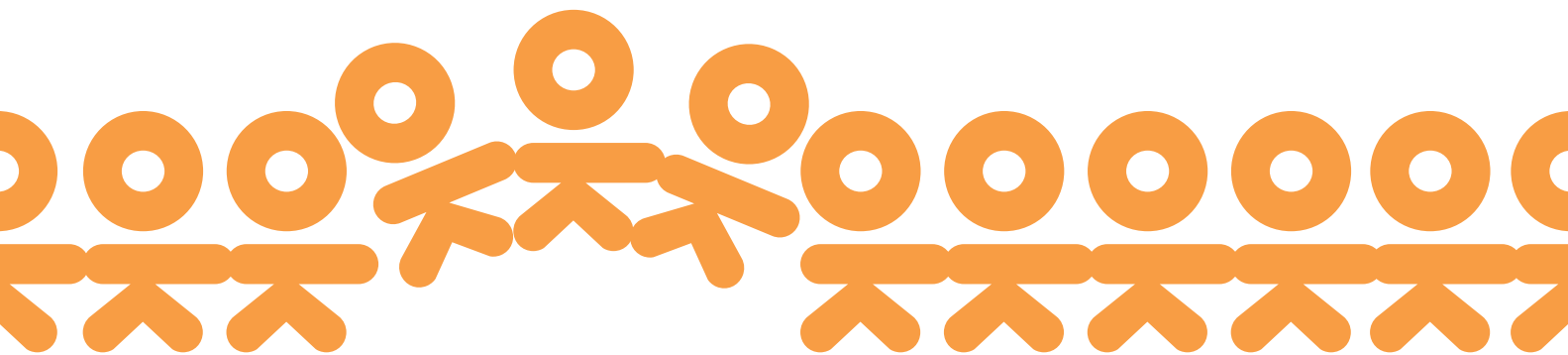

**BANDE**  
PER PEDODONZIA

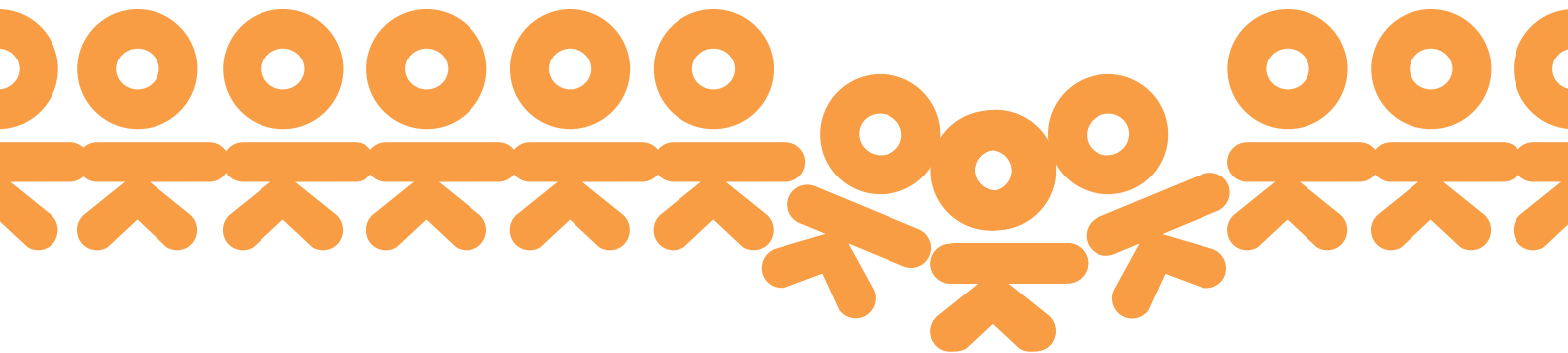

## BANDE PEDODONTICHE UNIVERSALI

PROGETTATE PER RISPONDERE ALLE  
ATTUALI ESIGENZE DELL'ORTODONZIA  
PEDIATRICA E CONSENTIRE IL TRATTAMENTO  
PRECOCE DEI PAZIENTI IN DENTATURA  
DECIDUA O MISTA

### FORMA E ALTEZZA

STUDIATE PER L'ANATOMIA  
DEI MOLARI DECIDUI



**UTILI NELLA COSTRUZIONE**  
DI ESPANSORI DEL MASCELLARE  
E DI MANTENITORI DI SPAZIO



**FABBRICATE IN ACCIAIO BIOMEDICALE TEMPRA MEDIA**



**FACILE ADATTAMENTO**  
ALLA FORMA TRONCO  
PIRAMIDALE DEI MOLARETTI

**MARCATURA LASER DELLE INDICAZIONI**  
PERMETTE LA STERILIZZAZIONE AD ALTE TEMPERATURE  
E UN'OTTIMA LEGGIBILITÀ DELLE MISURE NEL TEMPO

**SERVIZIO DI PREPUNTATURA GRATUITO**

PREPUNTATURE PERSONALIZZATE CON QUALSIASI TUBO,  
ATTACCO O ACCESSORIO DELLA GAMMA LEONE

## MOLARI DECIDUI SUPERIORI E INFERIORI

DISPONIBILI IN 10 MISURE SIA PER IL MASCELLARE CHE PER IL MANDIBOLARE, CON IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE MARCATO LASER. LA TEMPRA MEDIA DELL'ACCIAIO BIOMEDICALE UTILIZZATO PER LA LORO FABBRICAZIONE PERMETTE L'ADATTAMENTO ALLA FORMA TRONCO PIRAMIDALE DEI MOLARI DA LATTE MINIMIZZANDO LE PROBLEMATICHE DI DISTACCO.

NECESSARIE NELLA COSTRUZIONE DI ESPANSORI DEL MASCELLARE E DI MANTENITORI DI SPAZIO.



**E6165-96**

## ASSORTIMENTO BANDE PEDODONTICHE UNIVERSALI

IL KIT È COMPOSTO DA 5 BANDE PEDODONTICHE UNIVERSALI PER CIASCUNA MISURA SUPERIORE E INFERIORE PER UN TOTALE DI 100 PEZZI. IL TRAY NON È AUTOCLAVABILE.

CODICE		pkg.
<b>E6100-00</b>	Superiori - PU misure da 1 a 10	5
<b>E6500-00</b>	Inferiori - PL misure da 1 a 10	5

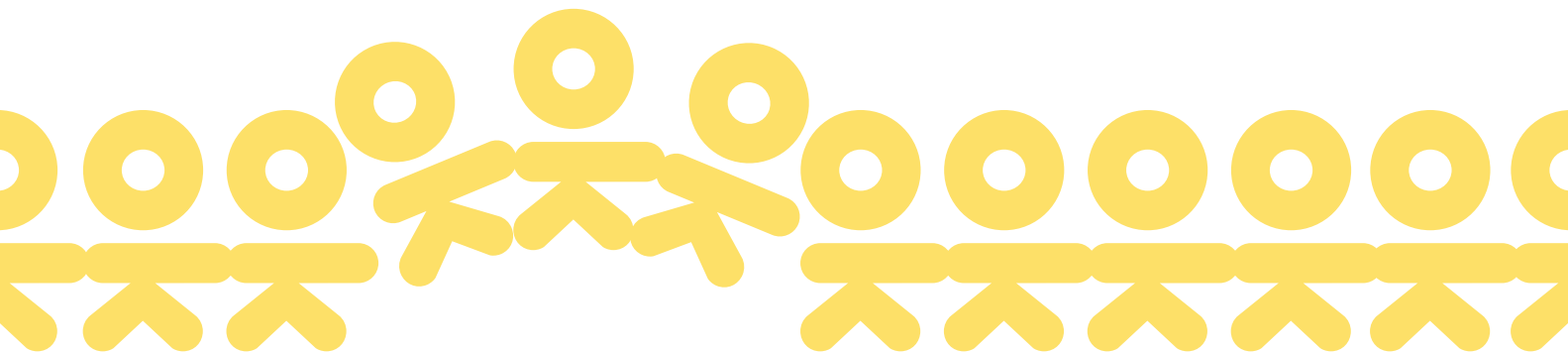
**SPECIFICARE SEMPRE  
LA MISURA DESIDERATA P.E.: E6100-05**




**un bimbo senza sorriso è come un giardino senza fiori**



**un bimbo senza sorriso è come un giardino senza fiori**



**DISPOSITIVI**  
INTRA-EXTRAORALI

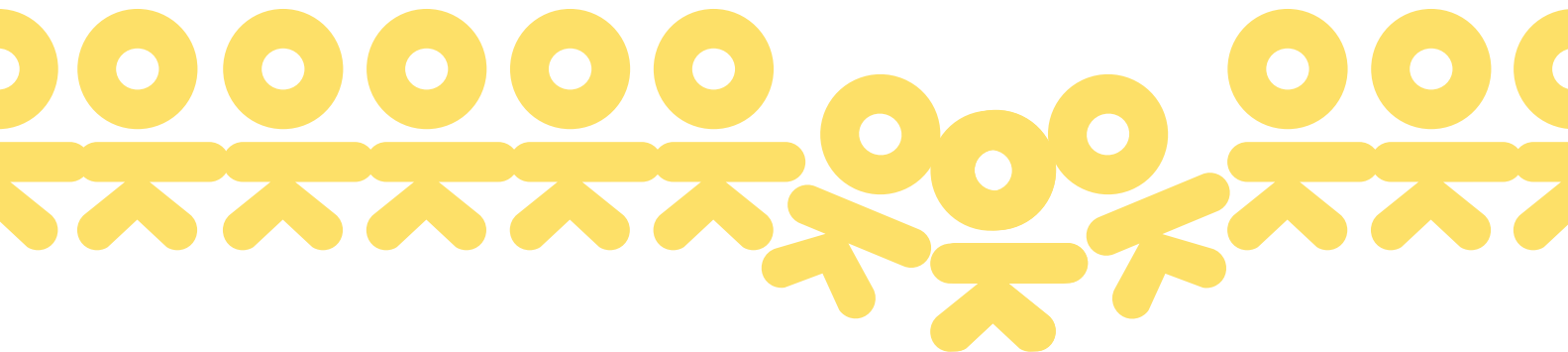

**M3052-00**

## **LIP BUMPER MINI**

DISPOSITIVO DISEGNATO DAL PROF. NICOLA VELTRI APPOSITAMENTE PER L'UTILIZZO SU PAZIENTI IN DENTATURA DECIDUA O MISTA, CON MANCANZA DI SPAZI E/O MANDIBOLA DI RIDOTTE DIMENSIONI SIA SAGITTALMENTE CHE TRASVERSALMENTE. L'APPLICAZIONE PRECOCE CHE TRASVERSALMENTE. L'APPLICAZIONE PRECOCE SUI MOLARETTI DECIDUI STIMOLA POSITIVAMENTE LO SVILUPPO DELL'ARCATA INFERIORE.

IL MINI LIP BUMPER È REALIZZATO CON UNA SPECIALE INCLINAZIONE DELL'ARCO TALE DA POSIZIONARE LO SCUDO ANTERIORE NELLA ZONA DI MASSIMA SPINTA DEL LABBRO ED HA UNO STOP REGOLABILE A VITE CHE RENDE POSSIBILE UNA PRECISA ATTIVAZIONE SENZA NECESSITÀ DI PIEGATURE DEL FILO.



**M0773-00**

## **MASCHERA FACCIALE MINI**

INDICATA NEL TRATTAMENTO DELLE RETRUSIONI MASCELLARI, DEI PROGNATISMI MANDIBOLARI E DELLE SCHISI PALATALI. IL CAMBIAMENTO DEI RAPPORTI FRA MASCELLA E MANDIBOLA FACILITA IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO ORTODONTICO. INTERAMENTE COSTRUITA IN ACCIAIO INOSSIDABILE E RESINA ATOSSICA, PUÒ ESSERE AGGIUSTATA DIMENSIONALMENTE PER ADATTARLA ALLE SINGOLE NECESSITÀ CON REGOLAZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE. TUTTI I BLOCCAGGI SONO REALIZZATI CON VITI A BRUGOLA.

DISPONIBILE  
IN COLORE BEIGE



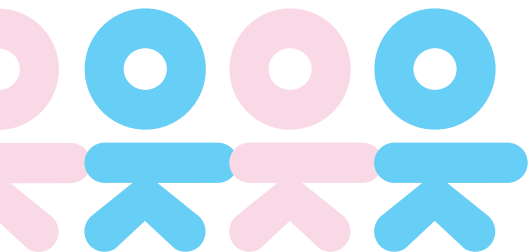




**un bimbo senza sorriso è come un giardino senza fiori**



**un bimbo senza sorriso è come un giardino senza fiori**



**Ortodonzia e Implantologia**

**Leone S.p.a.**

Via P. a Quaracchi 50  
50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

**Ufficio Vendite Italia:**

tel. 055.3044600 | fax 055.374808

italia@leone.it | www.leone.it

