


SISTEMA DE IMPLANTES

XCN[®]

EXACONNECT
PARA PRÓTESIS
ATORNILLADA UNITARIA
Y ACCESORIOS




EXACONNECT

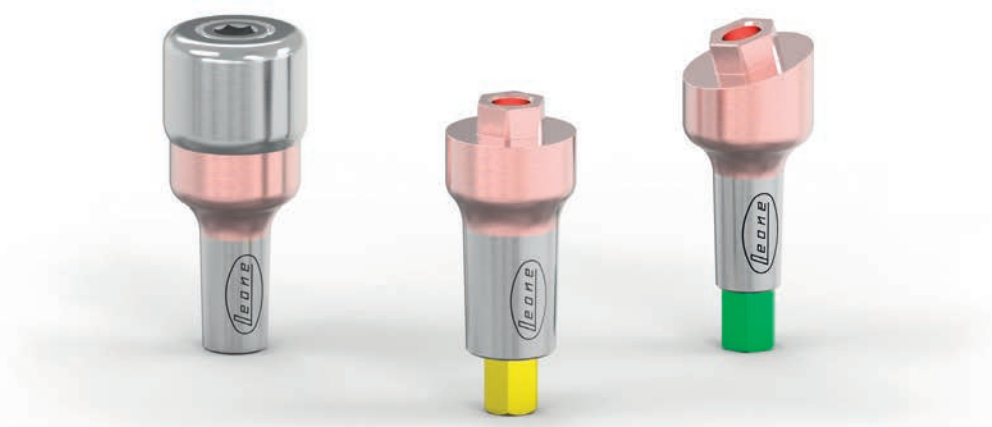


Ideal en caso de


- diente unitario atornillado
- tracto transmucoso profundo
- cicatrización transgingival
(con correspondiente tornillo de cicatrización)
- carga inmediata

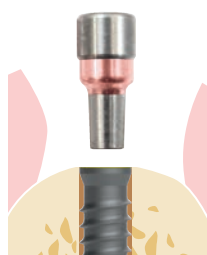


Colocación implante XCN® y ExaConnect con tornillo de cicatrización

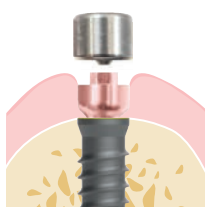


Remoción del tornillo de cicatrización

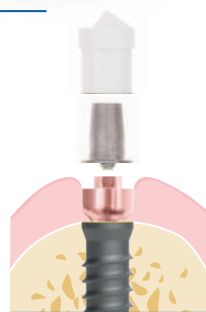

Toma de la impresión digital sobre el ExaConnect

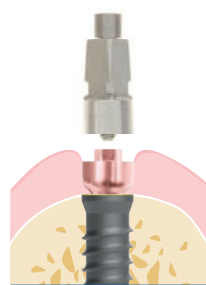

Toma de la impresión tradicional sobre el ExaConnect

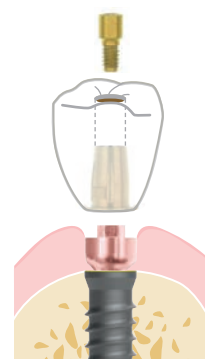

Entrega de la corona atornillada

Características

- fabricado en titanio medical grado 5
- emergencia con hexágono externo *Perfect Fit* para limitar la posibilidad de destornillamiento de la corona
- anodizado color rosa
- **ExaConnect**: esterilizable en autoclave
suministrado montado sobre tornillo polifuncional para facilitar su colocación y orientación
- **ExaConnect Plus**: estéril
suministrado montado sobre posicionador para facilitar su posicionamiento y orientación

Protocolo One Abutment-One Time


Un protocolo mínimamente invasivo que prevé la inserción del ExaConnect en el momento de la colocación del implante sin que sea removido después. La toma de la impresión e la realización de la prótesis se harán sobre el ExaConnect protegiendo los tejidos durante los procedimientos de curación y de fabricación de la prótesis.

Ti-Base inclinado

El ExaConnect es ideal para un flujo de trabajo digital debido al hecho que este se convierte en pilar Ti-Base con varias angulaciones y distintas alturas gingivales.

Simplicidad protésica

El ExaConnect simplifica el procedimiento protésico gracias al movimiento de la plataforma protésica desde nivel óseo a nivel tisual, con grande flexibilidad de alturas y inclinaciones; una grande ventaja sobretudo en caso de tracto transmucoso muy profundo.

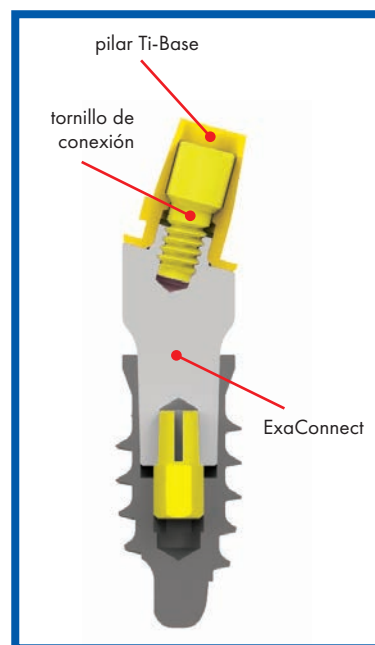


EXACONNECT PLUS - estéril

El ExaConnect Plus es proyectado para ser colocado inmediatamente después del posicionamiento del implante. Es premontado encima de un posicionador que agiliza su posicionamiento y orientación en el implante. El conector no tiene el hexágono y por lo tanto se puede rotar 360°.

El tornillo de cicatrización premontado permite acondicionar los tejidos blandos con la inclinación del conector elegido favoreciendo una estética natural. La estética es mejorada ulteriormente por la anodización del ExaConnect que mimetiza el metal bajo los tejidos blandos.

Una vez conectado el ExaConnect al implante, ya no es necesario removerlo, ya que la toma de la impresión y la realización de la prótesis se realizan encima del ExaConnect.

Gracias a la conexión como Morse autobloqueante entre ExaConnect y el implante, el organismo reconoce los dos elementos como una pieza única que se convierten en el **equivalente de un implante transmucoso**.

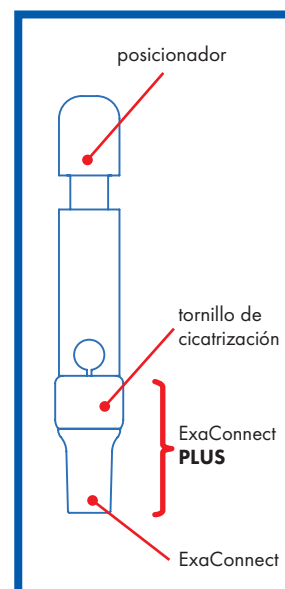

EXACONNECT




Instrumentos necesarios

- elección del ExaConnect más idóneo con los Abutment Gauge
- activación de la conexión con el percutor con punta recta o curva en PEEK
- en caso de implante con conexión verde colocado > 1 mm subcrestal utilizar el Bone Profiler Ø 4,5 mm

Envase

- 1 ExaConnect montado sobre tornillo polifuncional
- 1 hexágono

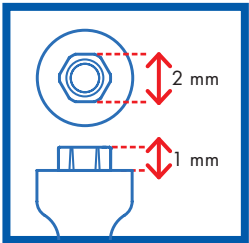


ExaConnect


1:1




Ø conexión (mm)
GH (mm)

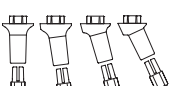

2,2
1,5

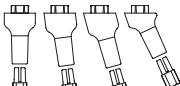


2,2
3

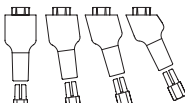

2,2
5

REF	rectos	126-2201-01	126-2203-01	126-2205-01
	angulados 7,5°	126-2201-07	126-2203-07	126-2205-07
	angulados 15°	126-2201-15	126-2203-15	126-2205-15
	angulados 25°	126-2201-25	126-2203-25	126-2205-25

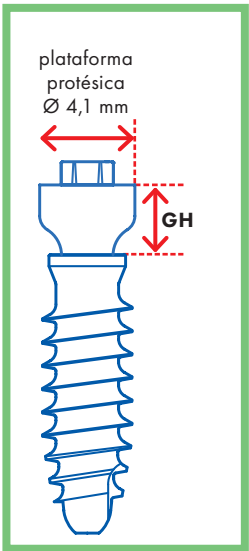

ExaConnect


1:1




Ø conexión (mm)
GH (mm)



3,0
1,5

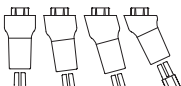


3,0
3

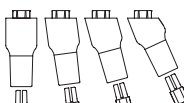

3,0
5

REF	rectos	126-3001-01	126-3003-01	126-3005-01
	angulados 7,5°	126-3001-07	126-3003-07	126-3005-07
	angulados 15°	126-3001-15	126-3003-15	126-3005-15
	angulados 25°	126-3001-25	126-3003-25	126-3005-25

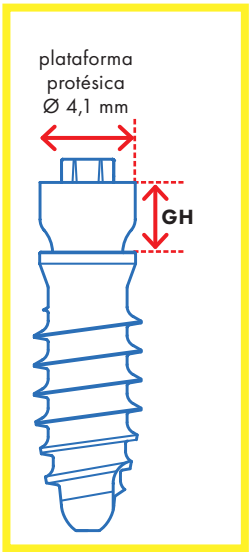

EXACONNECT PLUS



Instrumentos necesarios

- elección del ExaConnect Plus más idóneo con los Abutment Gauge
- activación de la conexión con el percutor con punta recta o curva en titanio



Envase estéril

- 1 ExaConnect con tornillo de cicatrización montado sobre posicionador



ExaConnect Plus

1:1

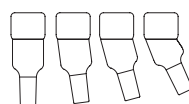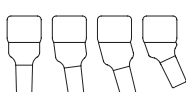

Ø conexión (mm)
GH (mm)


2,2
1,5

2,2
3

2,2
5



REF	rectos	126-2221-01	126-2223-01	126-2225-01
	angulados 7,5°	126-2221-07	126-2223-07	126-2225-07
	angulados 15°	126-2221-15	126-2223-15	126-2225-15
	angulados 25°	126-2221-25	126-2223-25	126-2225-25

new

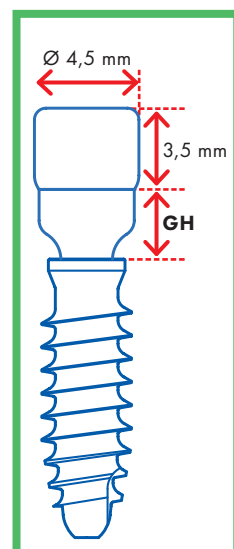

ExaConnect Plus

1:1

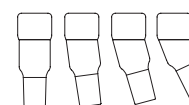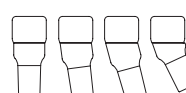

Ø conexión (mm)
GH (mm)


3,0
1,5

3,0
3

3,0
5

REF	rectos	126-3021-01	126-3023-01	126-3025-01
	angulados 7,5°	126-3021-07	126-3023-07	126-3025-07
	angulados 15°	126-3021-15	126-3023-15	126-3025-15
	angulados 25°	126-3021-25	126-3023-25	126-3025-25

new

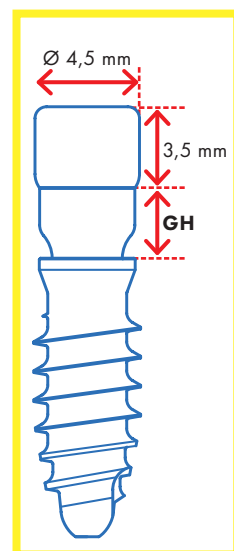


TORNILLO DE CICATRIZACIÓN PARA EXACONNECT

- fabricado en titanio medical grado 5
- para acondicionar los tejidos blandos con el ExaConnect
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza

Instrumentos necesarios:

racor para tornillos con el atornillador manual protésico

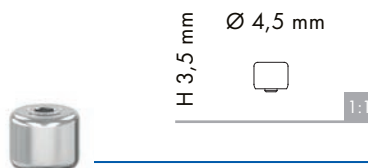

REF **126-2230-00**

TRANSFER PARA REPOSICIONAMIENTO PARA EXACONNECT

- fabricado en acero inoxidable
- para detectar la posición del ExaConnect conectado al implante
- para técnicas de cubeta cerrada
- esterilizable en autoclave


Envase:

1 transfer para reposición

1 tornillo para reposición

Instrumentos necesarios:

racor para tornillos con el atornillador manual protésico

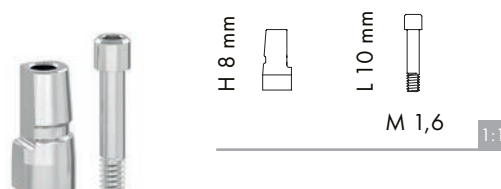

REF **144-2610-00**

TRANSFER PICK-UP PARA EXACONNECT

- fabricado en acero inoxidable
- para detectar la posición del ExaConnect conectado al implante
- para técnicas de cubeta abierta
- esterilizable en autoclave


Confezione:

1 transfer Pick-Up

1 tornillo Pick-Up

Instrumentos necesarios:

racor para tornillos con el atornillador manual protésico

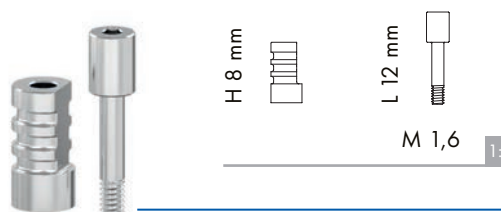


REF **144-2608-01**

ANÁLOGO EXACONNECT

- fabricado en acero inoxidable
- para reproducir en el modelo de yeso la posición del ExaConnect conectado al implante

Envase: 1 pieza

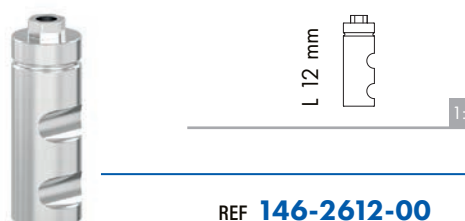


REF **146-2612-00**

PILAR TI-BASE PARA EXACONNECT

- fabricado en titanio medical grado 2
- para la protesización definitiva
- para realizar una corona atornillada con tecnología CAD-CAM o método tradicional
- anodizado color amarillo para mimetizar el metal bajo las cerámicas translúcidas
- esterilizable en autoclave

Envase:

- 1 pilar anodizado color amarillo
- 1 tornillo de conexión anodizado color amarillo

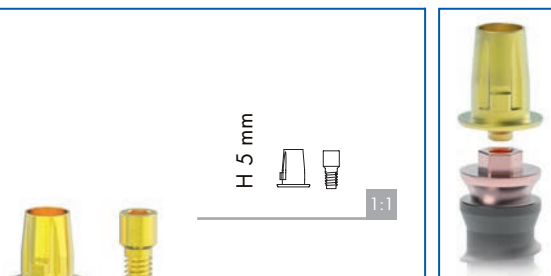

REF **121-2605-51**

TI-BASE DA PARA LABORATORIO/ESCANEADO PARA EXACONNECT

- fabricado en acero
- para la toma de la impresión digital y para las pruebas sobre el ExaConnect y sobre el análogo ExaConnect
- no idóneo para la protesización
- esterilizable en autoclave

Envase:

- 1 Ti-Base para laboratorio/escaneado
- 1 tornillo de conexión



REF **141-2605-51**

SCAN BODY INCLINED PLANE

- fabricado en material plástico
- para detectar la posición del ExaConnect a través de la toma de la impresión óptica intraoral o la digitalización del modelo en laboratorio
- de usar con el Ti-Base para laboratorio/escaneado para ExaConnect
- esterilizable en autoclave

Envase: 5 piezas blancas



REF **141-0000-35**

SCAN BODY PYRAMID

- fabricados en material plástico
- para detectar la posición del ExaConnect a través de la toma de la impresión óptica intraoral o la digitalización del modelo en laboratorio
- de usar con el Ti-Base para laboratorio/escaneado para ExaConnect
- esterilizables en autoclave

Envase: 10 piezas (5 blancas y 5 grises)




REF **141-0000-51**

CALCINABLE PARA TI-BASE PARA EXACONNECT

- fabricado en material plástico calcinable
- para realizar una corona atornillada con método tradicional a cementar sobre el pilar Ti-Base
- de usar con el Ti-Base para laboratorio para ExaConnect

Envase: 4 piezas

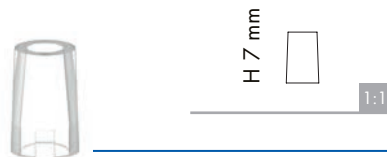

REF **121-0207-26**


PILAR PROVISIONAL PARA EXACONNECT

- fabricado en PEEK
- para realizar una corona provisional atornillada
- radiolúcidos
- esterilizable en autoclave

Envase:

1 pilar

1 tornillo de conexión anodizado color amarillo

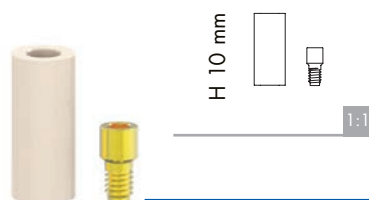


REF **161-2610-00**



TORNILLO POLIFUNCIONAL PARA EXACONNECT

- fabricado en titanio medical grado 5
- para facilitar la orientación y la paralelización del ExaConnect
- para realizar un canal de dimensiones adecuadas para el tornillo de conexión durante la modelización de la estructura en laboratorio
- anodizado color amarillo
- esterilizable en autoclave

Envase: 2 piezas

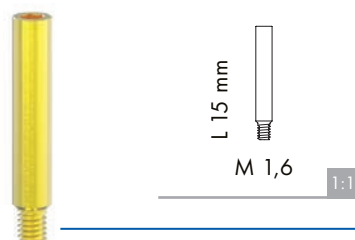

REF **126-0215-06**

TORNILLO DE CONEXIÓN PARA EXACONNECT

- fabricado en titanio medical grado 5
- para fijar la corona al ExaConnect
- anodizado color amarillo
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza

Instrumentos necesarios:

- racor para tornillos cortos o largos
- con el atornillador manual protésico o
- con llave de carraca dinamométrica protésica
- alternativamente atornillador para contrángulo



REF **126-0201-00**