

SISTEMA DE IMPLANTES

XCN[®]


INSTRUMENTOS PROTÉSICOS Y DE LABORATORIO





Características

- fabricado en material plástico PPSU
- contiene los instrumentos base para la elección, activación y remoción de los pilares
- amplia disponibilidad de soportes para sujetar posteriores instrumentos protésicos
- diseño simple e intuitivo gracias a las líneas marcadas que identifican las posiciones de cada instrumento
- posición inclinada después de la apertura para un fácil acceso a los instrumentos
- soportes en silicona (grommets) Ø 2 mm
- completamente autoclavable

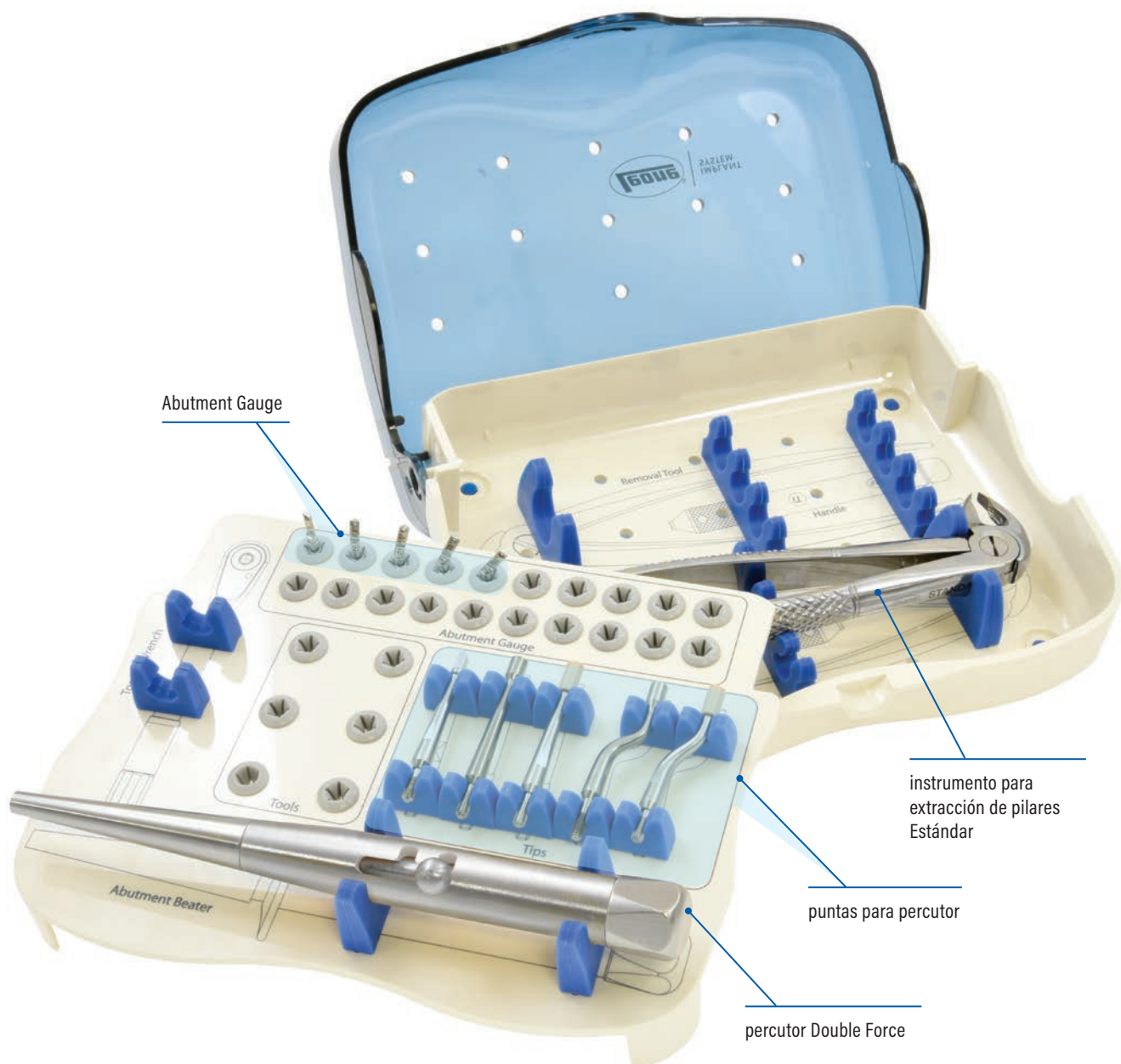

KIT INSTRUMENTOS PROTÉSICOS COMPLETO

REF **156-0070-01**

Envase

- 1 Abutment Gauge recto
- 1 Abutment Gauge angulado 7,5°
- 1 Abutment Gauge angulado 15°
- 1 Abutment Gauge angulado 25°
- 1 Abutment Gauge angulado 35°
- 1 percutor Double Force
- 1 punta recta en titanio
- 1 punta recta en PEEK
- 1 punta curva en titanio
- 1 punta curva en PEEK
- 1 punta plana en acero inoxidable
- 1 instrumento para remoción de pilares Estándar



KIT INSTRUMENTOS PROTÉSICOS VACÍO


REF **156-0070-00**



ABUTMENT GAUGE

- fabricados en acero inoxidable
- un único instrumento para dos funciones: medir el espesor de los tejidos blandos y elegir la angulación más idónea del pilar
- universales, idóneos para todas las tipologías de pilares y para los dos diámetros de conexión verde y amarillo
- el cilindro apical partido garantiza una óptima retención en el hexágono interno del implante análogo ofreciendo la posibilidad de rodearlos 360°
- ideales también para procedimientos de carga inmediata
- con orificio para la inserción de un hilo de seguridad
- esterilizables en autoclave para un seguro utilizzo tanto en la clínica como en laboratorio

Envase: 1 pieza

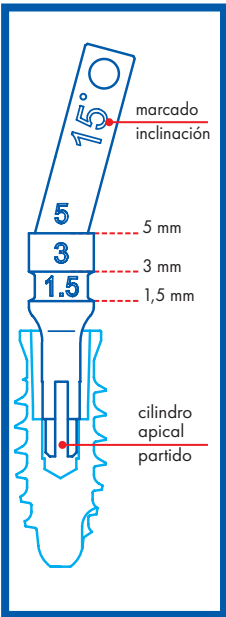

REF 141-0000-00 141-0075-00 141-0015-00 141-0025-00 141-0035-00

ORGANIZER ABUTMENT GAUGE

- fabricado en material plástico PPSU
- completamente esterilizable en autoclave

Envase:

- 1 Abutment Gauge 0°
- 1 Abutment Gauge 7,5°
- 1 Abutment Gauge 15°
- 1 Abutment Gauge 25°
- 1 Abutment Gauge 35°



REF 141-0001-03



PERCUTOR DOUBLE FORCE

- fabricado en acero inoxidable
- dotado de doble ranura para dos modalidades de liberación de la fuerza de activación FULL (completo) o HALF (mitad)
- la nueva modalidad de activación permite una mayor precisión en la aplicación de la fuerza
- indicado particularmente en la zona estética y para pilares angulados
- puntas intercambiables
- autoclavable

Envase:

- 1 percutor
- 1 punta recta en PEEK
- 1 punta plana en acero inoxidable



REF **156-1008-10**



PERCUTOR

- fabricado en acero inoxidable
- para ejercer la fuerza necesaria para la conexión del tapón de cicatrización y del pilar al implante
- para activar la conexión entre el capuchón conométrico y el pilar MUA-Conic
- puntas intercambiables
- esterilizable en autoclave

Envase CON PUNTAS RECTAS:

- 1 percutor
- 1 punta recta en titanio
- 1 punta recta en PEEK

Envase CON PUNTAS CURVAS:

- 1 percutor
- 1 punta curva en titanio
- 1 punta curva en PEEK


CON PUNTAS RECTAS

REF **156-1008-03**



CON PUNTAS CURVAS

REF **156-1008-04**

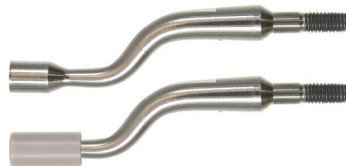

PUNTAS PARA PERCUSIÓN

- fabricadas en titanio medical grado 5, acero inoxidable y PEEK
- se enroscan en el percutor
- **punta recta:** idónea para la región anterior
- **punta curva:** idónea para la región posterior
- **puntas en PEEK:** idóneas para coronas de cerámica, pilares MUA, ExaConnect, pilares MUA-Conic y capuchones conométricos
- **punta plana:** idónea para la percusión de los pilares angulados para prótesis cementada
- esterilizables en autoclave

Envase: 1 pieza

punta recta en titanio

REF **156-1008-01**



punta recta en PEEK

REF **156-1008-08**



punta curva en titanio

REF **156-1008-02**



punta curva en PEEK

REF **156-1008-09**



punta plana en acero inoxidable

REF **156-1008-06**



EXTRACTOR DE CABEZA HEXAGONAL PARA TAPONES DE CICATRIZACIÓN

- fabricado en acero inoxidable
- para desbloquear el tapón de cicatrización y permitir su extracción
- hexágono presente en ambas extremidades para un fácil utilizzo en todas las situaciones
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



REF **156-1006-00**

ALICATES DE WEINGART

- fabricada en acero inoxidable
- para coger el pilar durante las fases de prueba
- puntas estriadas redondeadas para una sujeción segura del pilar
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



REF **P2104-00**

INSTRUMENTO PARA EXTRACCIÓN DE PILARES

- fabricado en acero inoxidable
- para ejercer la fuerza necesaria para la extracción de un pilar conectado de forma definitiva al implante
- dos modelos: uno para todos los pilares de la plataforma protésica Estándar y uno para todos los pilares de la plataforma protésica Large
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza




REF **156-1022-01**

estándar

REF **156-1022-02**

large

*Para más detalles
descargar el "Procedimiento de
extracción de los pilares Leone"*

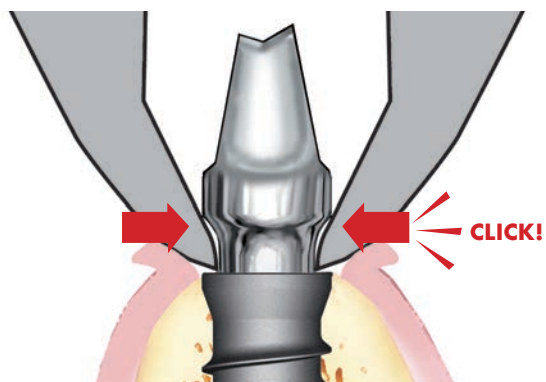

ATORNILLADOR PARA CONTRANGULO

new

- fabricado en acero inoxidable
- para atornillar y destornillar los tornillos de conexión y el adaptador Conic con el mango del contrángulo
- no utilizar con torque superior a 20 Ncm
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1002-03**

RACOR PARA TORNILLOS

- fabricados en acero inoxidable
- se utilizan con el atornillador manual protésico, la carraca dinamométrica protésica y el atornillador dinamométrico de laboratorio para atornillar y desatornillar los tornillos de conexión, los tornillos de cicatrización, el adaptador Conic, los transfer para ExaConnect y el transfer PickUp para MUA
- esterilizables en autoclave

Envase:

- 1 racor para tornillos
- 1 atornillador manual protésico



L 12,5 mm



L 20 mm

1:1

REF **126-0003-00**

126-0003-01

ATORNILLADOR MANUAL PROTÉSICO

- fabricado en titanio medical grado 5
- se utiliza con el correspondiente racor para atornillar y desatornillar manualmente los tornillos de conexión, los tornillos de cicatrización y el adaptador Conic
- con orificio para la colocación de un hilo de seguridad
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1001-00**

CARRACA DINAMOMÉTRICA PROTÉSICA 20 Ncm

- fabricada en acero inoxidable
- se utiliza con el específico racor para atornillar los tornillos de conexión y el adaptador Conic con un torque de 20 Ncm
- bidireccional: para atornillar y destornillar
- se puede desmontar para la limpieza
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1014-26**

CARRACA DINAMOMÉTRICA 20 Ncm
PARA LABORATORIO

- fabricada en acero inoxidable
- se utiliza con el específico racor para atornillar los tornillos de conexión y el adaptador Conic con un torque de 20 Ncm
- bidireccional: para atornillar y destornillar
- no se debe desmontar para la limpieza

Envase: 1 pieza



1:1

REF 156-2006-00

MANGO PARA PILARES

- fabricado en titanio medical grado 5
- se utiliza para el fresado de pilares tanto en laboratorio como en la clínica

Envase: 1 pieza



para pilares con Ø conexión (mm)

2,2

1:1

REF 156-1007-33



para pilares con Ø conexión (mm)

3,0

1:1

REF 156-1007-41