

SISTEMA DE IMPLANTES

XCN[®]


**INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS**



FRESAS

Características

- fabricadas en acero inoxidable con una elevada resistencia al desgaste y a la corrosión
- esterilizables en autoclave

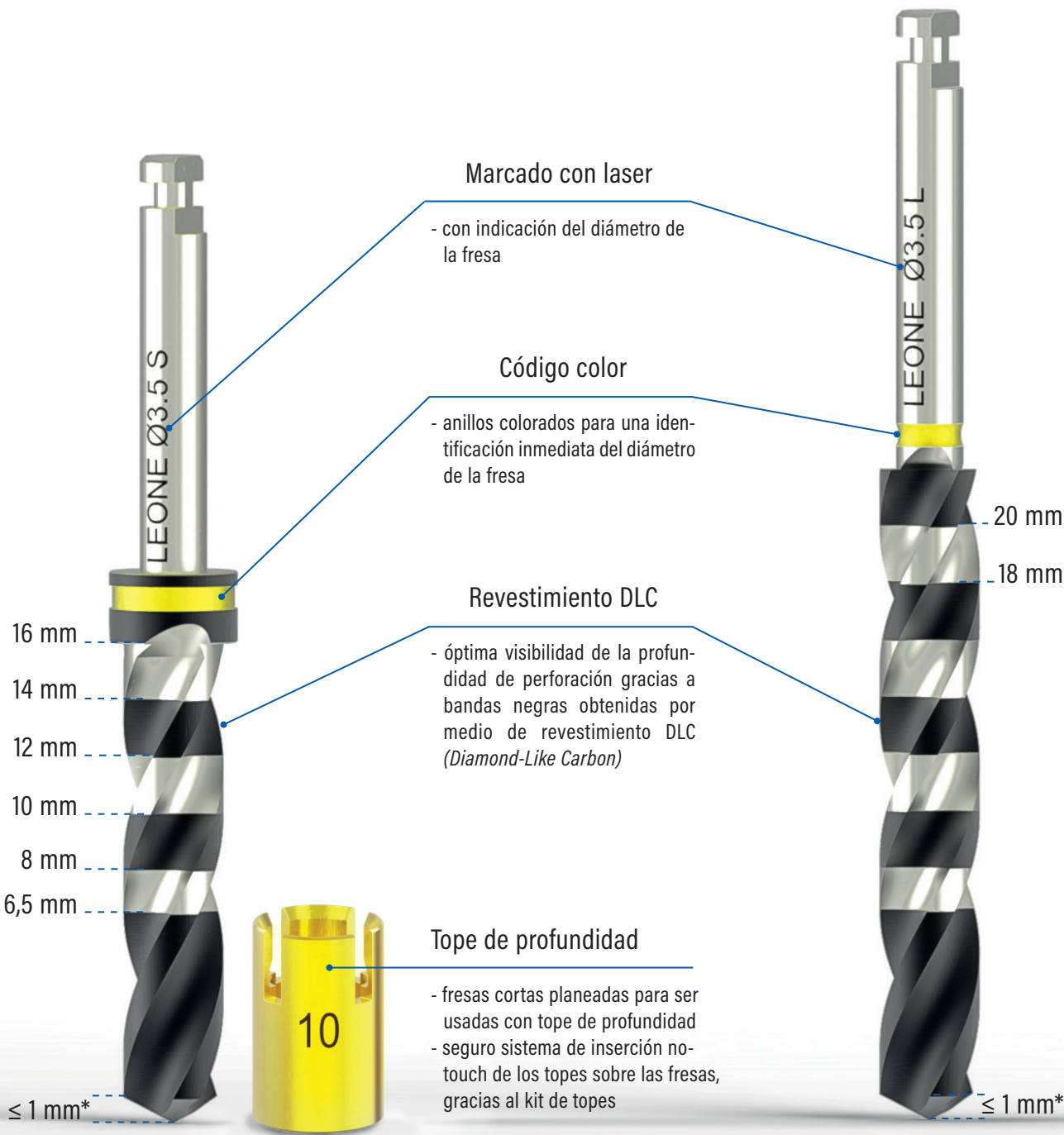

El instrumental cortante utilizado mas de 20 veces o desgastados tienen que ser reemplazados.

*En las fresas piloto y en las fresas helicoidales **la profundidad de fresado** se calcula excluyendo la longitud de la punta que mide máximo 1 mm.

FRESA LANCEOLADA FRESA DE BOLA

- para crear en la cresta ósea el surco para las fresas sucesivas

Envase: 1 pieza



Ø 1,9 mm

L 30 mm



Ø 1,9 mm

L 34 mm



1:1

REF

151-1930-02

151-1934-01

FRESAS PILOTO

- para realizar el agujero piloto del sitio implantar
- posibilidad de utilizo de la fresa corta con tope de profundidad

Envase: 1 pieza



Ø 2,2 mm

L 33 mm



Ø 2,2 mm

L 39 mm



1:1

REF

151-2216-52

151-2222-42

FRESAS HELICOIDALES

- para aumentar el diámetro del sitio implantar hasta la dimensión deseada
- posibilidad de utilizo de las fresas cortas con tope de profundidad

Envase: 1 pieza

Ø 2,8 mm

L 33 mm



Ø 2,8 mm

L 39 mm



Ø 3,5 mm

L 33 mm



Ø 3,5 mm

L 39 mm




Ø 4,2 mm

L 33 mm



Ø 4,2 mm

L 39 mm

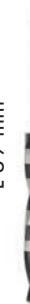

1:1

REF

151-2816-53

151-2822-43

151-3516-53

151-3522-43

151-4216-53

151-4222-43

FRESAS HELICOIDALES PARA HUESO DENSO

- fresas dedicadas a los implantes Max Stability
 - para evitar torque de inserción excesivos en caso de hueso denso
 - doble marca en código color para diferenciarlas de las otras fresas helicoidales
 - posibilidad de utilizo de fresas cortas con tope de profundidad
- Envase:** 1 pieza



	Ø 3,1 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm
	L 33 mm	L 39 mm	L 33 mm	L 39 mm
				
REF	151-3116-53	151-3122-43	151-3816-53	151-3822-43

1:1

FRESAS AVELLANADORAS

- para crear el alojamiento de la porción coronal ensanchada del implante
 - utilizo al final de la secuencia quirúrgica
- Envase:** 1 pieza



	Ø 3,3 mm	Ø 4,1 mm	Ø 4,8 mm
	L 33 mm	L 33 mm	L 33 mm
			
REF	151-3304-44	151-4104-44	151-4804-44


1:1

KIT DE TOPES *

- kit fabricado en aluminio
- topes fabricados en titanio medical grado 5
- para un control cierto de la profundidad de fresado a la hora de preparar el sitio implantar
- topes para la fresa piloto corta y las fresas helicoidales cortas
- sobre cada tope es indicada la profundidad de trabajo
- topes anodizados para facilitar la identificación
- inserción no-touch de los topes por la punta de la fresa con la ayuda del kit de topes
- fácil remoción de los topes gracias a la ranura correspondiente presente en el kit de topes y al instrumento dedicado
- esterilizable completamente en autoclave

Envase:

- 5 topes de profundidad Ø 2,2 mm:
L 6,5 - L 8 - L 10 - L 12 - L 14 mm
- 5 topes de profundidad Ø 2,8/3,1 mm:
L 6,5 - L 8 - L 10 - L 12 - L 14 mm
- 5 topes de profundidad Ø 3,5/3,8 mm:
L 6,5 - L 8 - L 10 - L 12 - L 14 mm
- 5 topes de profundidad Ø 4,2 mm:
L 6,5 - L 8 - L 10 - L 12 - L 14 mm
- 1 instrumento en PEEK para la remoción del tope

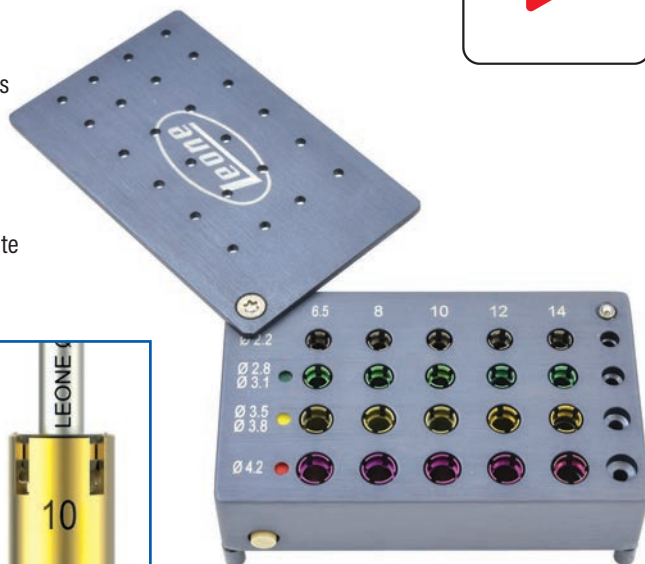


REF **156-0003-00**

TOPES DE PROFUNDIDAD

- fabricados en titanio medical grado 5
- recambios para el kit de topes
- esterilizables en autoclave

Envase:

- 1 tope de 6,5 mm
- 1 tope de 8 mm
- 1 tope de 10 mm
- 1 tope de 12 mm
- 1 tope de 14 mm

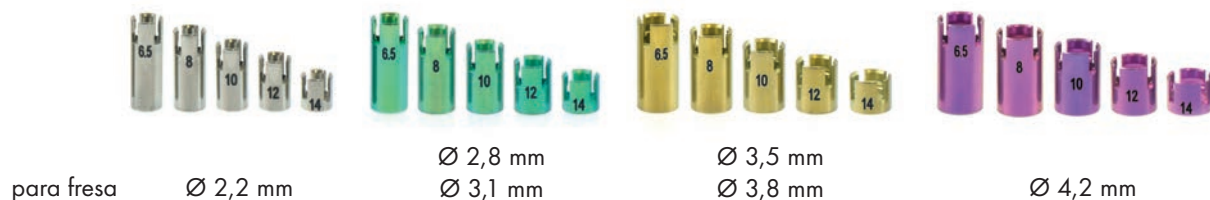

REF

156-2216-05

156-2816-05

156-3516-05

156-4216-05

*PATENTADO

FRESA PILOTO
CON TOPE INTEGRAL

- para realizar el agujero piloto del sitio implantar
- con tope integral de profundidad, realizado en pieza única con el cuerpo del instrumento

Envase: 1 pieza

Ø 2,2 mm




L 33 mm

Ø 2,2 mm



L 33 mm

Ø 2,2 mm

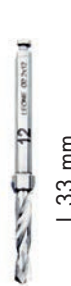

L 33 mm

Ø 2,2 mm



L 33 mm

1:1

REF 151-2208-12 151-2210-12 151-2212-12 151-2214-12

DISPOSITIVO ALARGADOR PARA FRESAS

- fabricado en acero inoxidable
- para aumentar la longitud total de las fresas de 16 mm
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF 156-1019-00

CONFORMADORES DE ROSCA
PARA IMPLANTES CLASSIX

- fabricados en acero inoxidable
- para la preparación del sitio implantar en caso de densidad ósea elevada
- con código color
- esterilizables en autoclave

Envase: 1 pieza

Ø 3,3 mm



L 21 mm

Ø 4,1 mm



L 21 mm

Ø 4,8 mm



L 21 mm

1:1

REF 152-3321-00 152-4121-00 152-4821-00

CONFORMADORES DE ROSCA
PARA IMPLANTE SHORT 6.5

- fabricados en acero inoxidable
- conformador de rosca "A" para la preparación del sitio implantar del implante Short 6.5
- conformador de rosca "B" para la preparación del sitio implantar del implante Short 6.5 en caso de densidad ósea elevada después del utilizzo del conformador de rosca "A"
- dos ranuras distinguen entre conformador de rosca "A" y "B"
- esterilizables en autoclave

Envase: 1 pieza

Ø 5 mm



A

Ø 5 mm



B

1:1

REF 152-5021-01 152-5021-02

ANILLAS DE SUJECCIÓN

- fabricadas en elastómero
- recambios para conformadores de rosca e instrumentos
- esterilizables en autoclave

Envase: 5 piezas

-  REF **152-0000-01**
-  REF **152-0000-02**
-  REF **152-0000-03**
-  REF **152-0000-04**
-  REF **156-1002-02**

DRIVER HIGH TORQUE

- fabricados en acero inoxidable
- para atornillar y destornillar el implante cuando el transportador no es suficiente para transmitir la fuerza aplicada
- dos versiones:
 - verde** para la conexión de 2,2 mm
 - amarillo** para la conexión de 3,0 mm
- resisten hasta un torque de 160 Ncm
- sustituir después de un máximo de 50 usos
- esterilizables en autoclave

Envase: 1 pieza



REF **156-1033-00**

156-1041-00

1:1

RACOR PARA PIEZA DE MANO

- fabricado en acero inoxidable
- para atornillar y destornillar el implante con el contrángulo
- para utilizar los conformadores de rosca con el contrángulo
- no utilizar con torque superior a 50 Ncm
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



REF **156-1002-01**

1:1

DISPOSITIVO ALARGADOR PARA INSTRUMENTOS

- fabricado en titanio medical grado 5
- para aumentar la longitud total del transportador, del driver y del conformador de rosca
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



REF **156-1002-00**

1:1

CARRACA

- fabricada en titanio medical grado 5
- se utiliza con el conformador de rosca, el transportador y el driver
- bidireccional, para atornillar y destornillar
- no se debe desmontar
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1014-00**

ATORNILLADOR MANUAL QUIRÚRGICO

- fabricado en titanio medical grado 5
- se utiliza con el conformador de rosca, el transportador y el driver
- con orificio para la colocación de un hilo de seguridad
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1001-01**

VERIFICADOR DE PARALELISMO

- fabricado en titanio medical grado 5
- para controlar el paralelismo del sitio implantar con los dientes naturales y/o con eventuales sitios adyacentes
- un extremo de Ø 2,2 mm y el otro de Ø 2,8 mm
- con orificio para la colocación de un hilo de seguridad
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-2001-00**

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

- fabricado en titanio medical grado 5
- para controlar la profundidad del sitio implantar
- Ø 2,2 mm
- con orificio para la colocación de un hilo de seguridad
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-2002-00**

INSTRUMENTO PARA TAPONES DE CIERRE

- fabricado en titanio medical grado 5
- para el posicionamiento y la remoción del tapón de cierre
- para extraer el tapón de cicatrización GH 1,5 después del desbloqueo
- con orificio para la colocación de un hilo de seguridad
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1003-00**

EXTRACTOR DE CABEZA HEXAGONAL PARA TAPONES DE CICATRIZACIÓN

- fabricado en acero inoxidable
- para desbloquear el tapón de cicatrización y permitir su remoción
- hexágono en ambas extremidades para un fácil utilizo en todas las situaciones
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1006-00**

BANDEJA DE TITANIO

- fabricada en titanio medical grado 5
- apoyo seguro para instrumentos o productos de titanio
- esterilizable en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-1009-01**

PIN MEDIDOR DEL ESPESOR GINGIVAL

- fabricado en titanio medical grado 5
- para verificar la altura de los tejidos blandos y el paralelismo de los sitios implantares
- Ø 2,2 mm
- con orificio para la colocación de un hilo de seguridad
- esterilizables en autoclave

Envase: 1 pieza



1:1

REF **156-2004-00**

MUCOTOMOS PARA CONTRANGULO

- fabricados en titanio medical grado 5
- para efectuar un opérculo en la mucosa
- con código color correspondiente al diámetro del implante
- con marcas de profundidad y de diámetro
- esterilizables en autoclave

Envase: 1 pieza




REF 154-3315-20 154-3815-20 154-4115-20 154-4515-20 154-4815-20 154-5015-20


BONE PROFILER

- fabricados en acero inoxidable
- para la remoción del hueso de la parte coronal del implante cuando las paredes óseas interfieren con el perfil de emergencia del pilar
- pin guía verde para diámetro de conexión 2,2 mm
- pin guía amarillo para diámetro de conexión 3,0 mm
- fácil inserción y remoción del pin guía del implante con el instrumento para tapones de cierre
- Bone Profiler con marca de diámetro
- velocidad máxima: 50 r.p.m.
- esterilizables en autoclave


Envase: 1 pieza

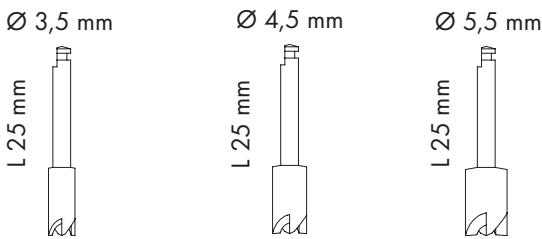

REF 151-3525-20 151-4525-20 151-5525-20

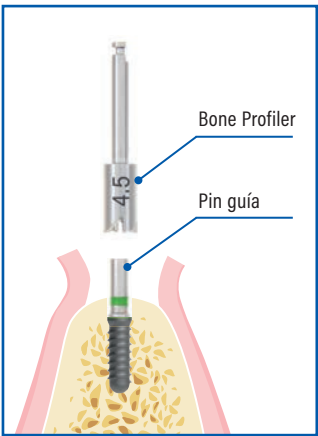

PIN GUÍA

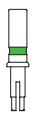

REF 156-1329-22 156-1338-30