

SISTEMA DE IMPLANTES

XCN[®]

PILARES PARA PRÓTESIS SOBRE ATACHES Y ACCESORIOS



PILARES DE BOLA



Ideales en caso de

- sobredentadura
- en maxilar superior necesarios mínimo cuatro implantes de soporte
- en mandíbula necesarios mínimo dos implantes de soporte

Características

- fabricados en titanio medical grado 5
- emergencia de cabeza esférica para el anclaje a la prótesis removible mediante cofias específicas
- cabeza esférica Ø 2,15 mm
- esterilizables en autoclave

Resistentes al desgaste

La cabeza esférica de los pilares es recubierta de nitruro de titanio (TiN) para aumentar la resistencia al desgaste.


Simple higiene

La cabeza esférica sin agujeros ni ranuras, gracias a la ausencia de un tornillo de conexión, hace que la higiene cotidiana sea mas fácil.



Excelente estabilidad de la prótesis

La cofia con capuchón tiene una grande superficie de apoyo sobre la cabeza y sobre el cuello del pilar, impidiendo que la prótesis bascule.

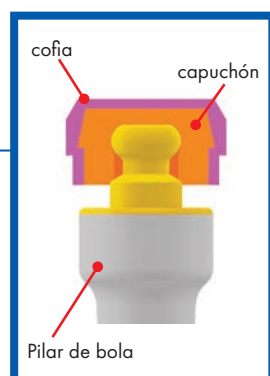

Fácil paralelización


Los pilares de bola Leone son disponibles tanto rectos como angulados 15° con tres alturas transmutables diferentes.

La corrección de los disparalelismos es además agilizado por la conexión XCN® 360° de los pilares angulados. El hexágono desconectado permite la rotación 360° en el modelo y su fijación en la posición elegida guía el clínico en el posicionamiento en la boca con la máxima precisión.

Amplia gama de cofias

Según las exigencias de cada caso es posible elegir entre diferentes tipologías de cofias:

- **cofias en titanio con capuchón, anodizadas de color rosado** para una mejor estética, con posibilidad de elección entre tres diferentes niveles de rigidez de los capuchones: suave (color blanco), medio (color naranja), rígido (color violeta)
- **cofias en titanio con O-ring**
- **micro cofias en titanio con micro O-ring**

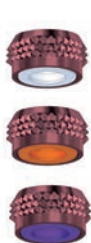

COFIAS
DE TITANIO ANODIZADO
con:
- capuchón suave (color blanco)
- capuchón medio (color naranja)
- capuchón rígido (color violeta)



COFIAS
EN TITANIO
con O-ring



MICRO COFIAS
EN TITANIO
con micro O-ring

Instrumentos necesarios

- elección del pilar de bola más idóneo con los Abutment Gauge
- activación de la conexión con el percutor con punta recta o curva en titanio

Envase

- 1 pilar
- 1 hexágono (excepto los rectos)
- 1 cofia con O-ring
- 1 cofia con capuchón naranja
- 2 anillos distanciadores para pilares




Pilares de bola

					1:1
Ø conexión (mm)		2,2	2,2	2,2	
Ø plataforma protésica (mm)		3,3	3,3	3,3	
GH (mm)		1,5	3	5	
REF	rectos	123-3300-01	123-3300-03	123-3300-05	
	angulados 15°	123-3315-01	123-3315-03	123-3315-05	

Pilares de bola

					1:1
Ø conexión (mm)		3,0	3,0	3,0	
Ø plataforma protésica (mm)		4,1	4,1	4,1	
GH (mm)		1,5	3	5	
REF	rectos	123-4100-01	123-4100-03	123-4100-05	
	angulados 15°	123-4115-01	123-4115-03	123-4115-05	

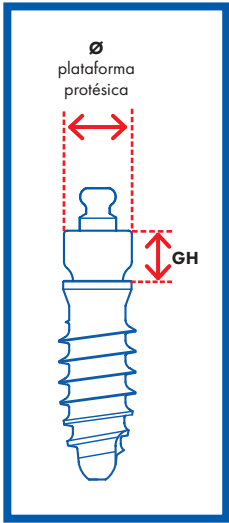


COFIA CON **CAPUCHÓN SUAVE** blanco

- cofia fabricada en titanio medical grado 5
- capuchón suave blanco montado en su interior
- fuerza de retención 5 N
- esterilizable en frío

Envase:

- 2 cofias con capuchón
- 2 anillos distanciadores para pilares

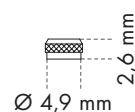

1:1

REF **123-0004-05**

CAPUCHÓN SUAVE blanco

- fabricado en elastómero
- recambio para la cofia con capuchón
- esterilizable en frío

Envase: 6 piezas



2:1


REF **123-0001-05**

COFIA CON **CAPUCHÓN MEDIO** naranja

- cofia fabricada en titanio medical grado 5
- capuchón medio naranja montado en su interior
- fuerza de retención 10 N
- esterilizable en frío

Envase:

- 2 cofias con capuchón
- 2 anillos distanciadores para pilares

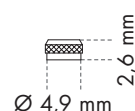

1:1

REF **123-0004-06**

CAPUCHÓN MEDIO naranja

- fabricado en elastómero
- recambio para la cofia con capuchón
- esterilizable en frío

Envase: 6 piezas



2:1


REF **123-0001-06**

COFIA CON **CAPUCHÓN RIGIDO** violeta

- cofia fabricada en titanio medical grado 5
- capuchón rígido violeta montado en su interior
- fuerza de retención 15 N
- esterilizable en frío

Envase:

- 2 cofias con capuchón
- 2 anillos distanciadores para pilares

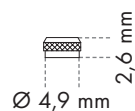

1:1

REF **123-0004-07**

CAPUCHÓN RIGIDO violeta

- fabricado en elastómero
- recambio para la cofia con capuchón
- esterilizable en frío

Envase: 6 piezas



2:1

REF **123-0001-07**

INSTRUMENTO PARA CAPUCHÓN

- fabricado en acero inoxidable
- para posicionar el capuchón en el interior de la cofia específica

Envase: 1 pieza



1:1


REF **156-1004-00**

COFIA CON O-RING

- fabricada en titanio medical grado 5
- O-ring premontado en el interior
- fuerza de retención 10 N
- esterilizable en autoclave

Envase:

- 1 cofia con O-ring
- 1 anillo distanciador para pilares

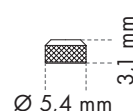

1:1

REF **123-0002-00**

O-RING

- fabricado en elastómero
- recambio para la cofia con O-ring
- agujero interno Ø 1,5 mm
- externo Ø 4,4 mm
- esterilizable en autoclave

Envase: 10 piezas



2:1


REF **123-0001-00**

MICRO COFIA CON MICRO O-RING

- fabricada en titanio medical grado 5
- micro O-ring premontado en el interior
- fuerza de retención 10 N
- esterilizable en autoclave

Envase:

- 1 micro cofia con micro O-ring
- 1 anillo distanciador para pilares (gris)
- 1 anillo distanciador para monoimplantes (blanco)

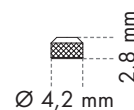

1:1

REF **123-0003-00**

MICRO O-RING

- fabricado en elastómero
- recambio para la micro cofia con micro O-ring
- agujero interno Ø 1,5 mm
- externo Ø 3,6 mm
- esterilizable en autoclave

Envase: 10 piezas



2:1

REF **123-0001-01**