


SISTEMA IMPLANTARE

XCN[®]

EXACONNECT
PER PROTESI AVVITATA
SINGOLA
E ACCESSORI

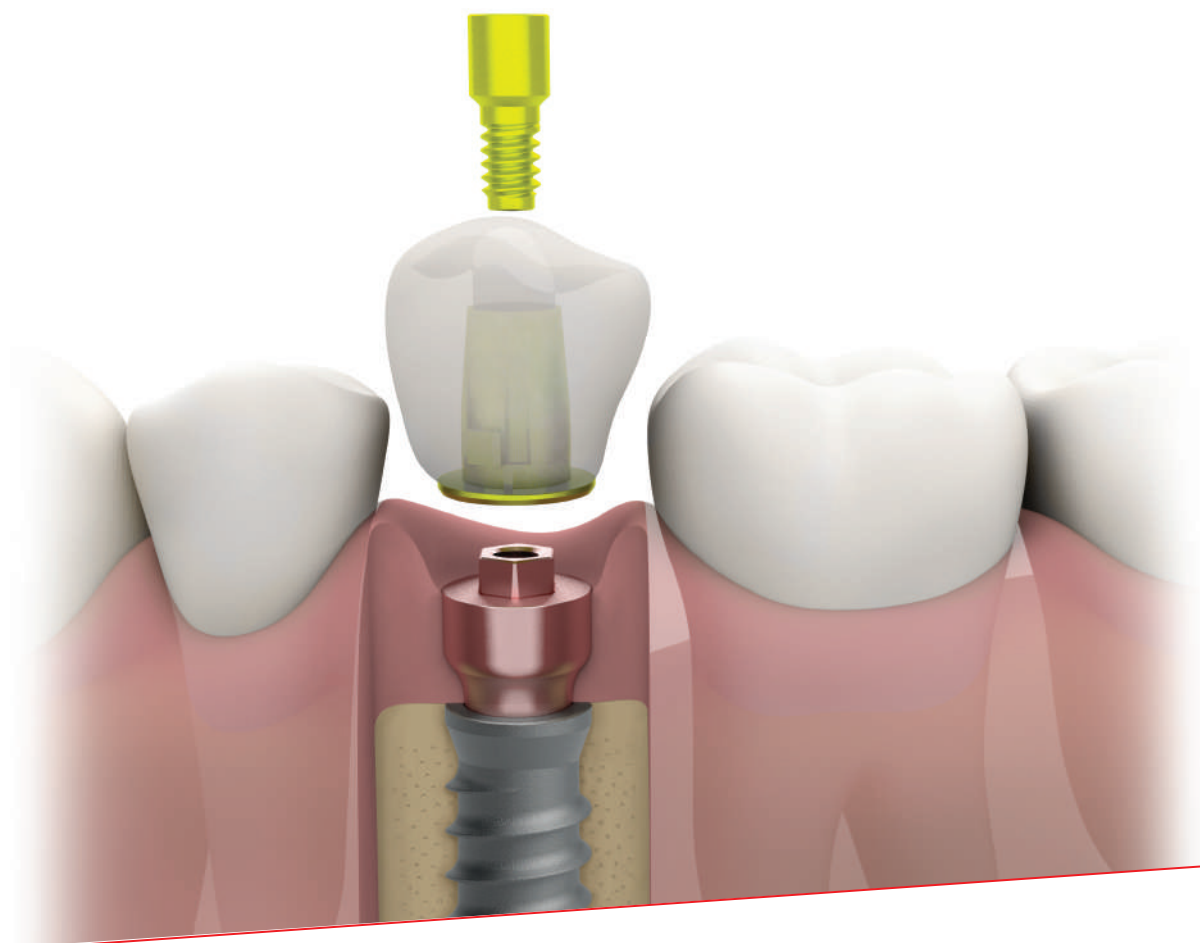


EXACONNECT




Ideale in caso di


- dente singolo avvitato
- tratto transmucoso profondo
- guarigione transgengivale (con apposita vite di guarigione)
- carico immediato

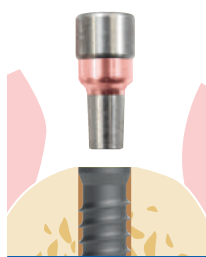


Inserimento impianto XCN® e ExaConnect con vite di guarigione

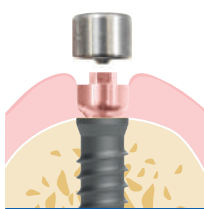


Rimozione della vite di guarigione

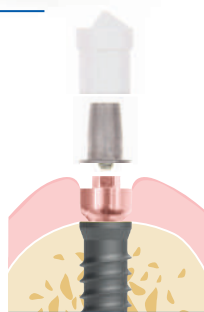

Presca impronta digitale sopra l'ExaConnect

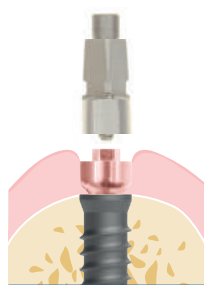

Presca impronta tradizionale sopra l'ExaConnect

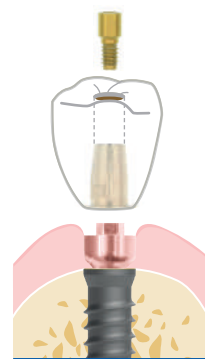

Consegna della corona avvitata

Caratteristiche

- fabbricato in titanio grado medicale 5
- emergenza con esagono esterno *Perfect Fit* per limitare la possibilità di svitamento della corona
- anodizzato rosa
- **ExaConnect**: autoclavabile
fornito montato su vite polifunzionale per facilitare il suo posizionamento e orientamento
- **ExaConnect Plus**: sterile
fornito montato su posizionatore per facilitare il suo posizionamento e orientamento

Protocollo One Abutment-One Time


Un approccio minimamente invasivo che prevede l'inserimento dell'ExaConnect subito dopo il posizionamento implantare senza che venga più rimosso. La presa dell'impronta e la realizzazione della protesi avvengono sopra l'ExaConnect salvaguardando i tessuti durante il processo di guarigione e di protesizzazione.

Ti-Base inclinato

L'ExaConnect è ideale per un flusso di lavoro totalmente digitale in quanto diventa un moncone Ti-Base con varie angolazioni e diverse altezze gengivali.

Semplicità protesica

L'ExaConnect semplifica la procedura protesica grazie allo spostamento della piattaforma protesica da *Bone Level* a *Tissue Level*, con grande flessibilità di altezze e inclinazioni; un grande vantaggio soprattutto in caso di tratto transmucoso molto profondo.

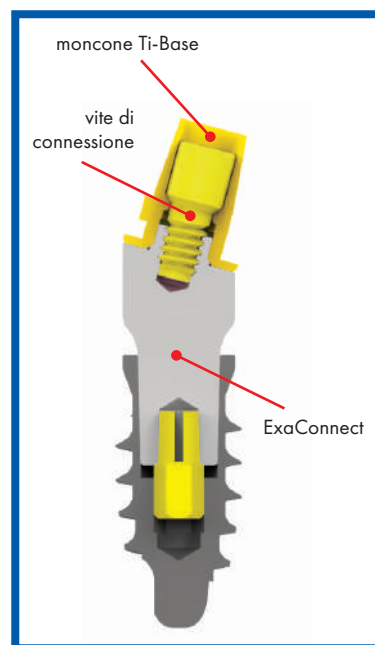


EXACONNECT PLUS - sterile

L'ExaConnect Plus è progettato per essere inserito subito dopo il posizionamento implantare. È premontato su un posizionatore che agevola il suo posizionamento e orientamento nell'impianto. Il connettore è privo di esagono e si può quindi ruotare a 360°.

La vite di guarigione premontata permette di condizionare i tessuti molli con l'inclinazione del connettore scelto favorendo un'estetica naturale. L'estetica è migliorata ulteriormente dall'anodizzazione dell'ExaConnect che mimetizza il metallo sotto i tessuti molli.

Una volta connesso l'ExaConnect all'impianto non è più necessario rimuoverlo, dal momento che l'impronta e la realizzazione della protesi vengono eseguite sopra l'ExaConnect.

Grazie alla connessione a cono Morse autobloccante tra ExaConnect e impianto, l'organismo riconosce i due elementi come un pezzo unico che diventano quindi l'**equivalente di un impianto transmucoso**.

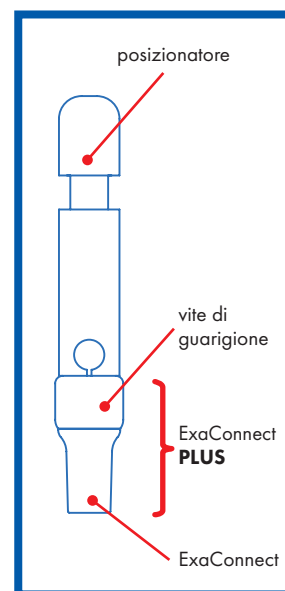

EXACONNECT



Strumenti necessari

- scelta dell'ExaConnect più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in PEEK
- in caso di impianto a connessione verde posizionato > 1 mm sottocrestale utilizzare il Bone Profiler Ø 4,5 mm

Confezione

- 1 ExaConnect montato su vite polifunzionale
- 1 esagono


GH
OTTIMIZZATO
PER UNA MIGLIORE
ESTETICA
vedi pag. 89

ExaConnect


1:1




Ø connessione (mm)
GH (mm)

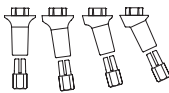

2,2
1,5

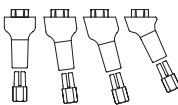



2,2
3

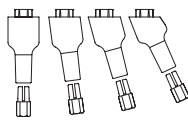

2,2
5

REF	diritti	126-2201-01	126-2203-01	126-2205-01
	angolati 7,5°	126-2201-07	126-2203-07	126-2205-07
	angolati 15°	126-2201-15	126-2203-15	126-2205-15
	angolati 25°	126-2201-25	126-2203-25	126-2205-25

new

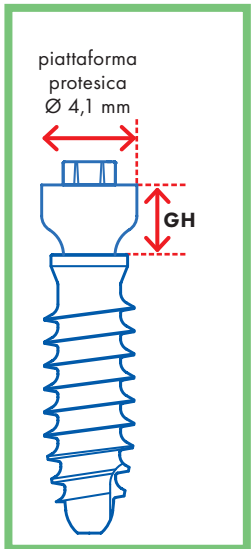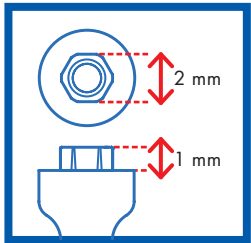


ExaConnect


1:1




Ø connessione (mm)
GH (mm)

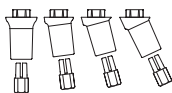

3,0
1,5

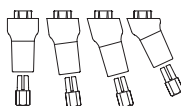


3,0
3

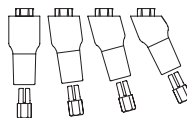

3,0
5

REF	diritti	126-3001-01	126-3003-01	126-3005-01
	angolati 7,5°	126-3001-07	126-3003-07	126-3005-07
	angolati 15°	126-3001-15	126-3003-15	126-3005-15
	angolati 25°	126-3001-25	126-3003-25	126-3005-25

new

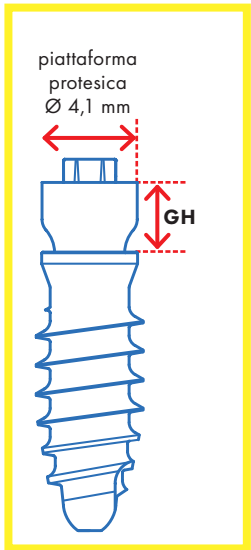

EXACONNECT PLUS



Strumenti necessari

- scelta dell'ExaConnect Plus più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in titanio



Confezione sterile

- 1 ExaConnect con vite di guarigione montato su posizionatore



ExaConnect Plus

1:1

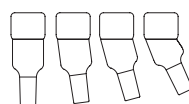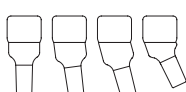
 $\varnothing$ connessione (mm)

2,2

2,2

2,2

GH (mm)


1,5

3

5

REF	diritti	126-2221-01	126-2223-01	126-2225-01
	angolati 7,5°	126-2221-07	126-2223-07	126-2225-07
	angolati 15°	126-2221-15	126-2223-15	126-2225-15
	angolati 25°	126-2221-25	126-2223-25	126-2225-25

new

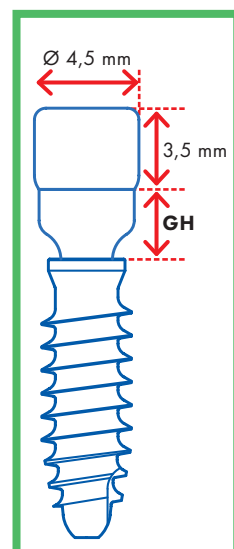

ExaConnect Plus

1:1


 $\varnothing$ connessione (mm)

3,0

3,0

3,0

GH (mm)


1,5

3

5

REF	diritti	126-3021-01	126-3023-01	126-3025-01
	angolati 7,5°	126-3021-07	126-3023-07	126-3025-07
	angolati 15°	126-3021-15	126-3023-15	126-3025-15
	angolati 25°	126-3021-25	126-3023-25	126-3025-25

new

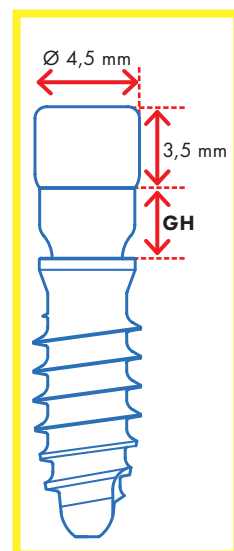


VITE DI GUARIGIONE PER EXACONNECT

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- per condizionare i tessuti molli con l'ExaConnect
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:

raccordo per viti con l'avvitatore manuale protesico

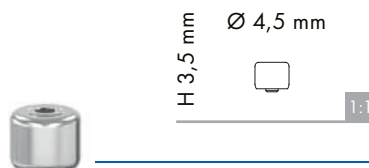

REF **126-2230-00**

TRANSFER DA RIPOSIZIONAMENTO PER EXACONNECT

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per rilevare la posizione dell'ExaConnect fissato all'impianto
- per tecnica a cucchiaio chiuso
- autoclavabile


Confezione:

1 transfer da riposizionamento

1 vite da riposizionamento

Strumenti necessari:

raccordo per viti con l'avvitatore manuale protesico

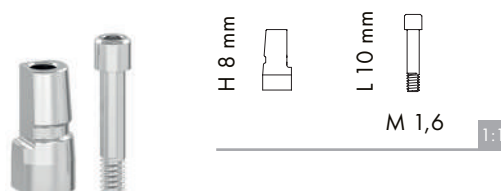

REF **144-2610-00**

TRANSFER PICK-UP PER EXACONNECT

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per rilevare la posizione dell'ExaConnect fissato all'impianto
- per tecnica a cucchiaio aperto
- autoclavabile


Confezione:

1 transfer Pick-Up

1 vite Pick-Up

Strumenti necessari:

raccordo per viti con l'avvitatore manuale protesico

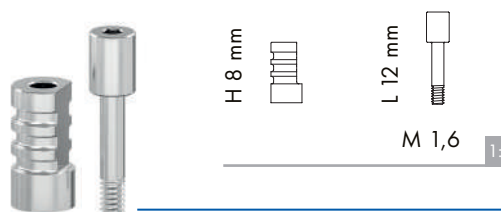


REF **144-2608-01**

ANALOGO EXACONNECT

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per replicare nel modello in gesso la posizione dell'ExaConnect fissato all'impianto

Confezione: 1 pezzo

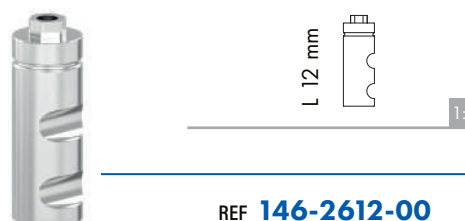


REF **146-2612-00**

MONCONE TI-BASE PER EXACONNECT

- fabbricato in titanio grado medicale 2
- per la protesizzazione definitiva
- per realizzare una corona avvitata con tecnologia CAD-CAM o metodica tradizionale
- anodizzato giallo per mimetizzare il metallo sotto ceramiche traslucide
- autoclavabile

Confezione:

- 1 moncone anodizzato giallo
- 1 vite di connessione anodizzata gialla

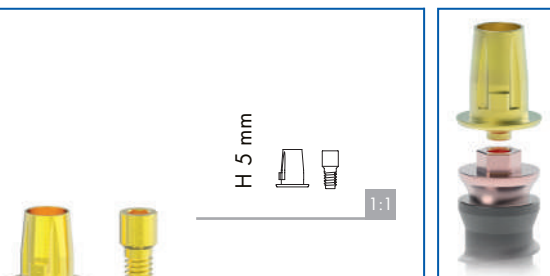

REF **121-2605-51**

TI-BASE DA LABORATORIO/SCANSIONE PER EXACONNECT

- fabbricato in acciaio
- per la presa d'impronta digitale e per le prove sull'ExaConnect e sull'analogo ExaConnect
- non idoneo per la protesizzazione
- autoclavabile

Confezione:

- 1 Ti-Base da laboratorio/scansione
- 1 vite di connessione



REF **141-2605-51**

SCAN BODY INCLINED PLANE

- fabbricato in materiale plastico
- per rilevare la posizione dell'ExaConnect attraverso presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- da usare con il Ti-Base da laboratorio/scansione per ExaConnect
- autoclavabile

Confezione: 5 pezzi bianchi



REF **141-0000-35**

SCAN BODY PYRAMID

- fabbricati in materiale plastico
- per rilevare la posizione dell'ExaConnect attraverso presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- da usare con il Ti-Base da laboratorio/scansione per ExaConnect
- autoclavabili

Confezione: 10 pezzi (5 bianchi e 5 grigi)




REF **141-0000-51**

CALCINABILE PER TI-BASE PER EXACONNECT

- fabbricato in materiale plastico calcinabile
- per realizzare una corona avvitata con metodica tradizionale da incollare sul moncone Ti-Base
- da usare con il Ti-Base da laboratorio per ExaConnect

Confezione: 4 pezzi

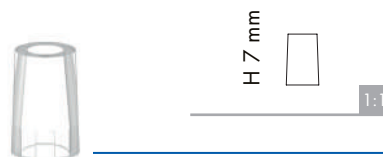

REF **121-0207-26**


MONCONE TEMPORANEO PER EXACONNECT

- fabbricato in PEEK
- per realizzare una corona avvitata provvisoria
- radiotrasparente
- autoclavabile

Confezione:

1 moncone

1 vite di connessione anodizzata gialla

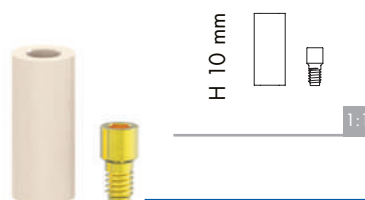


REF **161-2610-00**



VITE POLIFUNZIONALE PER EXACONNECT

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- per facilitare l'orientamento e la parallelizzazione dell'ExaConnect
- per realizzare un canale di dimensioni adeguate per la vite di connessione durante la modellazione della struttura in laboratorio
- anodizzata gialla
- autoclavabile

Confezione: 2 pezzi

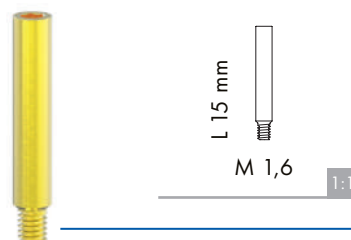

REF **126-0215-06**

VITE DI CONNESSIONE PER EXACONNECT

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- per fissare la corona all'ExaConnect
- anodizzata gialla
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:

- raccordo per viti corto o lungo con l'avvitatore manuale protesico o con il cricchetto dinamometrico protesico
- in alternativa avvitatore per manipolo



REF **126-0201-00**